

# Массажный шлем Yamaguchi Galaxy Axiom Pro

Руководство пользователя







## Содержание

Меры предосторожности.....	4
Ключевые особенности.....	5
Комплект поставки.....	6
Описание деталей.....	7
Использование.....	8
Устранение неполадок.....	9
Уход и хранение.....	10
Технические характеристики.....	10

## Меры предосторожности

**Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.**

- Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться массажером без присмотра со стороны.
- Рекомендованное время непрерывного массажа – 15 минут. Повторный сеанс массажа можно проводить не раньше, чем через 60 минут после предыдущего.
- Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов или в помещениях с повышенной влажностью.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении подозрительного запаха или шума) немедленно прекратите его использование!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Запрещено погружать массажер в воду или другие жидкости во время его очистки.
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.
- Запрещено использовать массажер во время вождения автомобиля.
- Перед использованием массажера снимите заколки с волос и контактные линзы.
- Не включайте массажер не надев его на голову, т.к. это может привести к повреждению устройства.
- Данное устройство предназначено для людей с обхватом головы 56-64 см.
- Не используйте дополнительные детали, не рекомендованные компанией-производителем.
- При использовании батареек в течение длительного срока, утилизируйте их в соответствии с местными законами.
- Не используйте данное устройство в качестве лечения или профилактики. При наличии одного из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:
  - при воспалениях или закупорке сосудов головного мозга;
  - при острых состояниях после травм головы;
  - при гипертонии или гипотонии;

- после операций головного мозга и инсультов;
- при сердечно-сосудистой недостаточности;
- при обострениях хронических заболеваний;
- при наличии злокачественных опухолей;
- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при ограниченных умственных способностях;
- во время беременности;
- в возрасте до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.


**Примечание.**

Массажер **Yamaguchi Galaxy PRO** не предназначен для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

## Ключевые особенности

- Управление шлемом с помощью специального приложения **Galaxy Pro**
- Воздушно-компрессионный и акупунктурный и массаж головы
- Уникальный регулируемый массаж теменной части головы
- Опциональный прогрев
- Регулировка массажера по размеру
- Съёмная фронтальная часть
- Встроенная расслабляющая музыка
- Возможность прослушивания музыки через наушники
- Таймер: 15 минут
- Массажер работает от литиевой батареи, что позволяет всегда брать его с собой и использовать дома, в офисе или на отдыхе
- Удобный кейс для транспортировки и хранения в комплекте



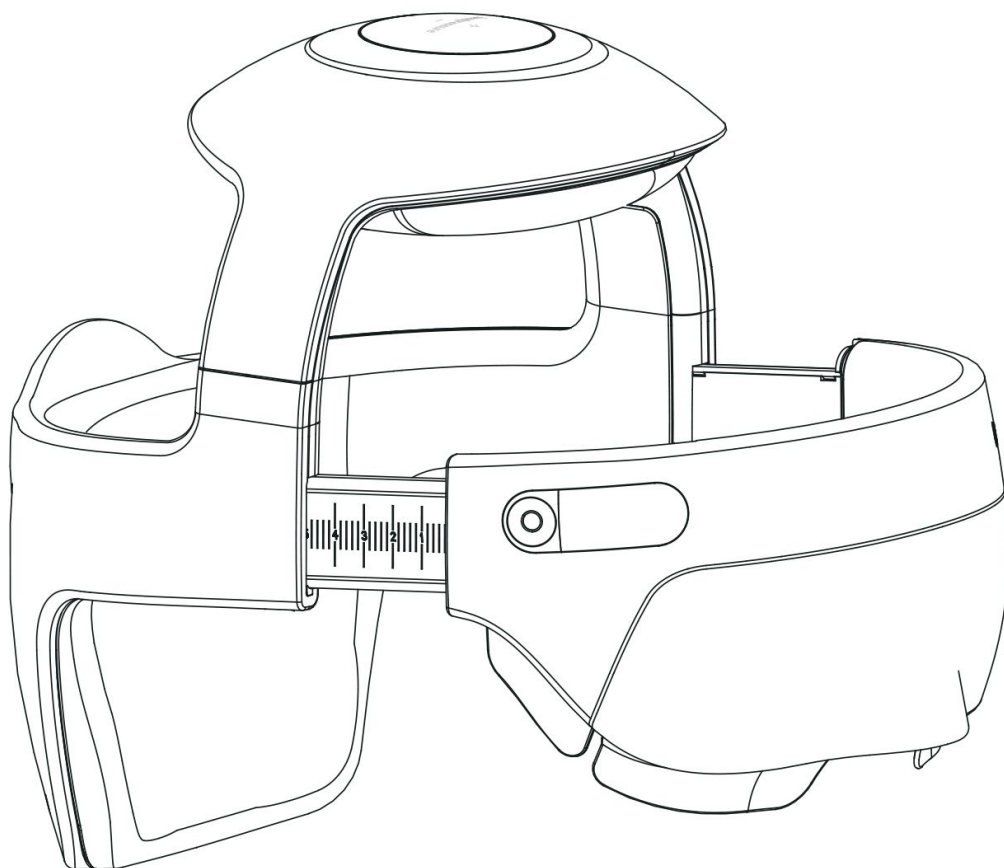


## Комплект поставки


- Массажер для головы x 1
- Кейс для транспортировки и хранения x 1
- Наушники x 1
- Пластиковая вставка для фронтальной части x 1
- Шнур питания для заряда литиевой батареи (USB-шнур и переходник) x 1
- Руководство пользователя x 1
- Упаковочная коробка\* x 1

\* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

## Описание деталей

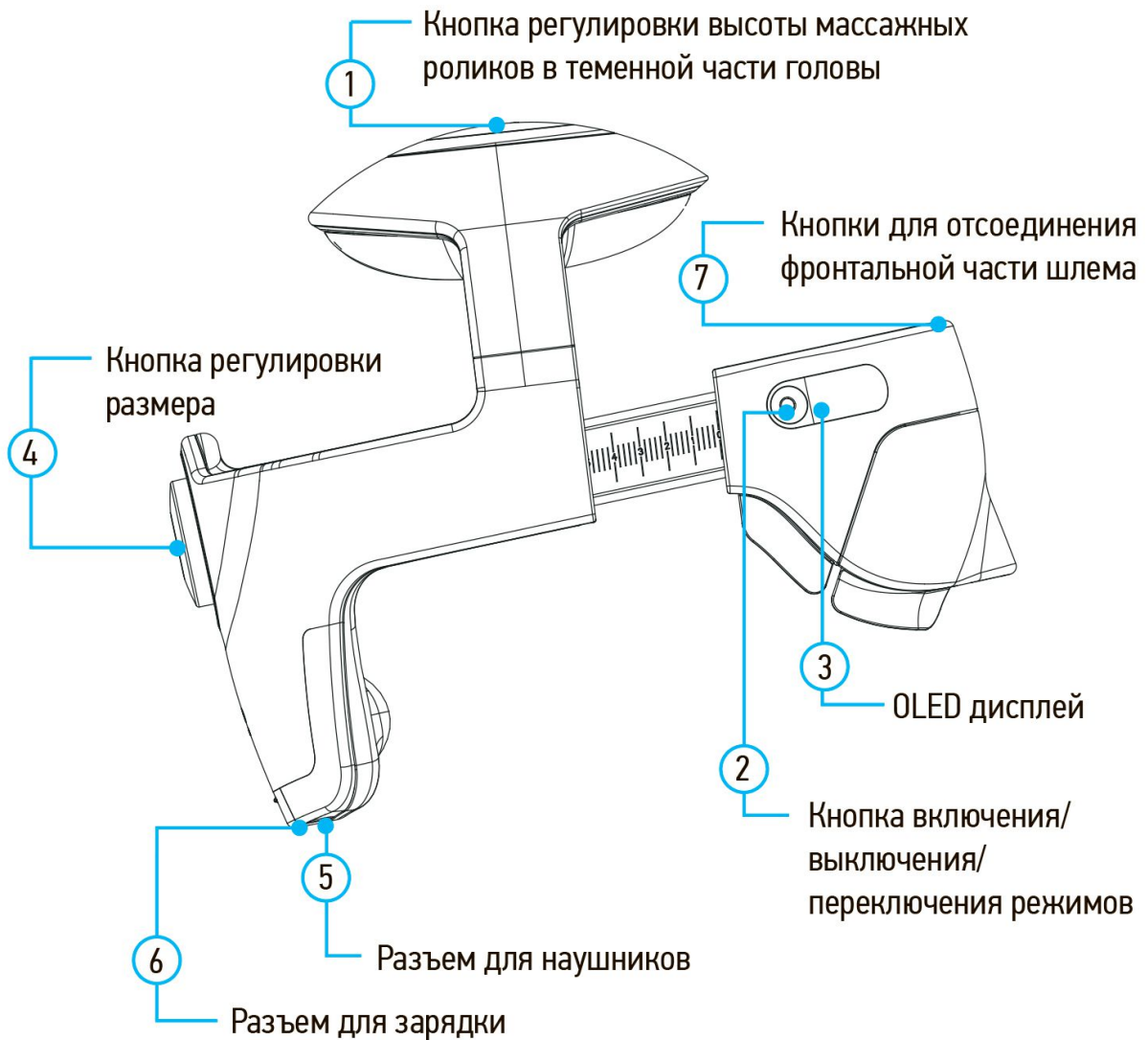

## Акупунктурные точки воздействия

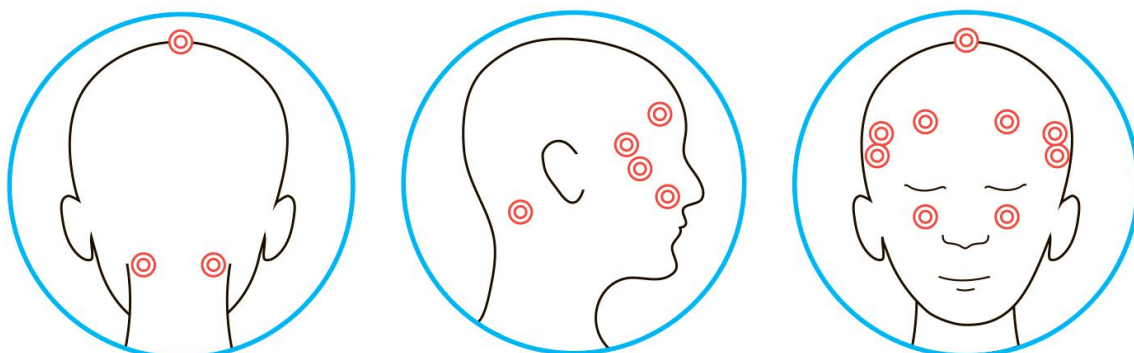

# Использование

## Перед началом использования

- Перед началом использования убедитесь, что все составляющие устройства, входящие в комплект поставки, на месте.
- Убедитесь, что у устройства достаточный уровень зарядки.
- Убедитесь, что адаптер устройства не поврежден.

## Зарядка

- Чтобы зарядить устройство, вставьте USB кабель с адаптером в разъем для зарядки (6), подключите адаптер к сети. Во время зарядки OLED дисплей мигает, когда устройство заряжено полностью, мигание прекращается.
- Убедитесь, что во время зарядки устройство отключено. Время полной зарядки – около 4 часов.
- Не используйте устройство во время процесса зарядки. Во время зарядки массажер не работает.

## Регулировка

- Нажмите на белую кнопку (4) – при этом передняя часть массажера выдвинется вперед. После этого наденьте шлем на голову и, поворачивая по часовой стрелке красную силиконовую часть кнопки (4) отрегулируйте устройство до нужного вам размера.

Избегайте слишком плотного прилегания массажера к голове, так как массаж производится за счет надувания и сдувания воздушных подушек.

- Отрегулировать высоту массажных роликов в теменной части головы можно уже во время массажа. Опустить ролики ниже можно коротким нажатием кнопки (1). Максимум – 3 нажатия. Чтобы поднять ролики выше, нажмите и удерживайте кнопку (1).
- Фронтальная часть массажера (зона глаз) является съемной. Чтобы снять данную часть, нажмите на кнопки (7). Вместо фронтальной части вставьте специальную пластиковую прозрачную вставку, которая входит в комплект поставки.

## Управление

- Для управления массажером используйте кнопку включения/выключения или специальное приложение **Galaxy PRO**.
- Чтобы начать массаж нажмите кнопку (2) ①. После этого включается режим MED. Еще одно короткое нажатие кнопки (2) ① позволяет включить режим HARD.
- В автоматических режимах сочетаются следующие терапевтические воздействия: воздушная компрессия в области глаз, висков, шеи, в теменной части. Сила воздушной компрессии во всех областях регулируется с помощью приложения **Galaxy PRO**.
- Специальные массажные ролики в области висков, шеи, в теменной части. Высота массажных роликов в теменной части и направление их движения регулируются с по-



мощью приложения **Galaxy PRO**.

- Прогрев в области глаз. Выключить или же включить обратно прогрев можно с помощью приложения **Galaxy PRO**.
- Музыка. Массаж сопровождается расслабляющей мелодией. Ее можно слушать через динамики или же через наушники, которые входят в комплектацию. Отрегулировать уровень громкости или поставить музыку на паузу позволяет приложение **Galaxy PRO**.
- Чтобы управлять массажером с помощью приложения, установите приложение **Galaxy PRO** из AppStore или PlayStore. Убедитесь, что на Вашем устройстве включен Bluetooth. После установки запустите приложение, в появившемся списке устройств выберите массажер для головы **Galaxy PRO** и подтвердите синхронизацию. После успешной синхронизации управлять устройством можно с помощью приложения.

MED	HARD
Воздушная компрессия	Воздушная компрессия
Прогрев (39-42°C)	Прогрев (39-42°C)
Музыка	Музыка
	Массаж теменной части головы
Таймер 15 минут	Таймер 15 минут

### Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку (2).

## Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы массажера слышен шум	Шум вызван сдуванием и надуванием воздушных подушек и вибрацией	Это нормальное явление, шум не является неисправностью массажера
Устройство не работает	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Массажер не включен	Включите устройство нажав на кнопку (2) 
Внезапное прекращение работы	Сработал автоматический таймер отключения	Повторный сеанс массажа можно проводить не ранее чем через 60 минут

## Уход и хранение

### Уход

- Перед очисткой выключите устройство.
- Очищайте корпус массажера мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте массажер в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

### Хранение

- Поместите массажер в кейс (входит в комплект).
- Храните массажер в сухом и прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Каждые 6 месяцев хранения массажера, включайте его и проверяйте работоспособность.

## Технические характеристики

Наименование продукта	Массажер для головы
Модель	Yamaguchi Axiom Galaxy PRO
Напряжение	5 В
Мощность	5 Вт
Таймер	15 мин
Условия хранения и эксплуатации	
Температура	5-40°C
Влажность	≤80%