



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА **MINIMO**
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ
MARUMAN MP-UV 120

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение ультразвуковой электрической зубной щетки MARUMAN MP-UV 120. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно использовать зубную щетку. Мы рекомендуем Вам сохранить данную инструкцию после прочтения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Материал корпуса – FBS.

Материал щетки – нейлон Burashisu.

Частота вращения щетки – примерно 22000 оборотов в минуту.

Питание – 3 батареи типа AAA (одна для щетки, две для УФ-стерилизатора).


Время работы от одного комплекта батарей – примерно 3 месяца при использовании дважды в день по 2 минуты, элементов питания УФ-стерилизатора – примерно 1,5 месяца.

Влагозащита – основную часть зубной щетки можно мыть во включенном состоянии. Ультрафиолетовый стерилизатор не имеет гидроизоляции (запрещено мыть водой).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите зубную щетку в недоступном для детей месте.
- Никогда не пробуйте разобрать, отремонтировать прибор или изменить его строение самостоятельно.
- Не оставляйте в течение длительного времени со вставленными элементами питания.
- Не извлекайте элементы питания влажными руками.
- Не используйте для других целей.
- После использования сполосните водой и вытрите насухо полотенцем.
- Если при использовании данного прибора у Вас возникнут какие-то жалобы или дискомфорт, если Вам покажется, что эта щетка Вам не подходит, пожалуйста, прекратите пользоваться ею и обратитесь к своему стоматологу.
- Не допускайте попадания на зубную щетку прямых солнечных лучей.
- Не держите зубную щетку вблизи горячих поверхностей и нагревателей.
- Плотно закрывайте батарейный отсек, не допуская попадания в него воды.
- При замене батареи соблюдайте полярность.
- При уходе за зубной щеткой не используйте химических растворителей.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

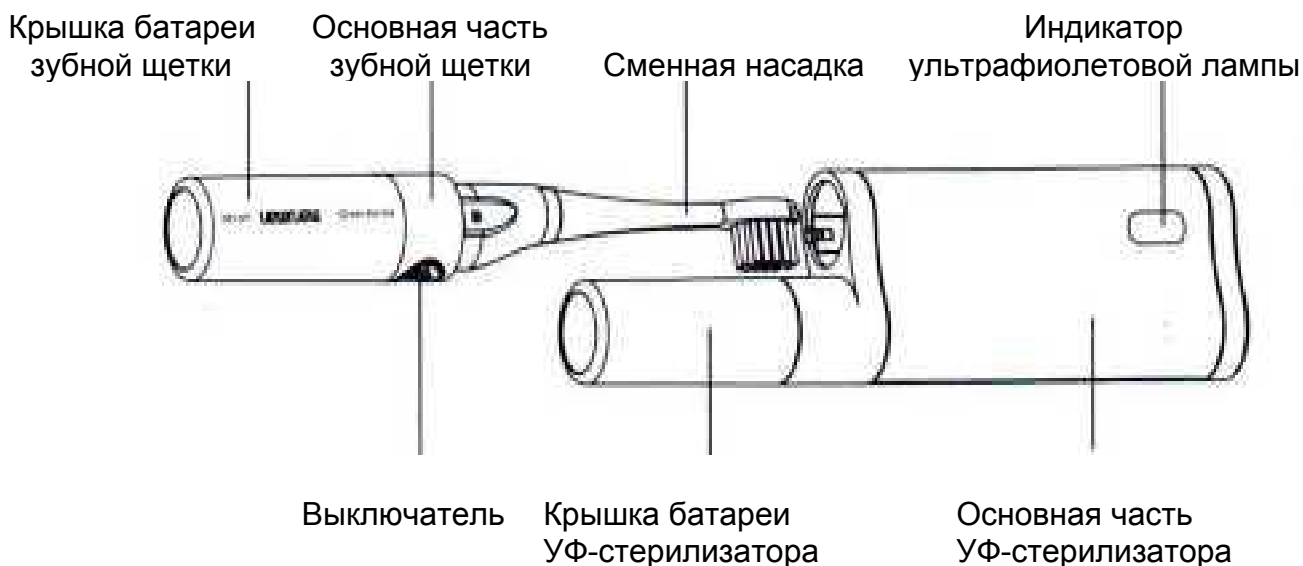

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

Для чистки зубов извлеките зубную щетку из ультрафиолетового стерилизатора.

После использования вставьте зубную щетку в стерилизатор. Лампа стерилизации включится автоматически на 6–8 минут.

Блок стерилизации не герметичен. Не допускайте попадания воды.


После чистки зубов вытрите насухо щетку полотенцем, в стерилизаторе зубная щетка не сохнет.

ЧИСТКА ЗУБОВ

1. Нанесите зубную пасту на щетину и приложите щетку к зубам.
2. Включите зубную щетку с помощью выключателя и чистите зубы, как обычной зубной щеткой.

3. Если вибрация зубной щетки становится меньше, замените батарейки.
4. Выключите зубную щетку после окончания чистки зубов.

ПОРЯДОК СМЕНЫ НАСАДОК ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

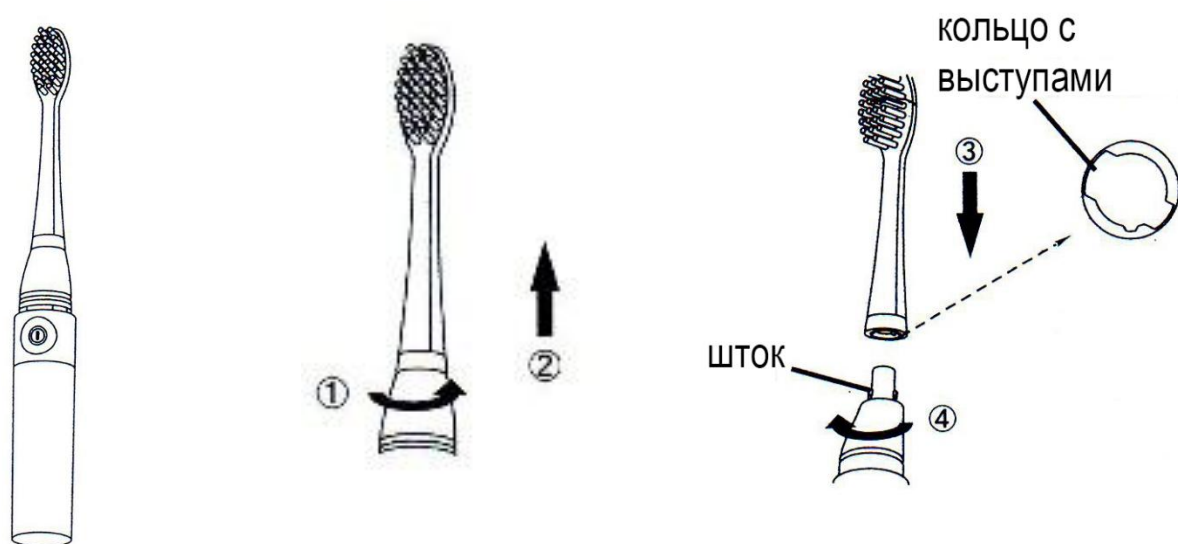

Приобретите специальные запасные щетки (насадки) (MP-DK001, MP-DK001N), меняйте насадки каждые три месяца.


1. Поверните замок по направлению стрелки.
2. Выньте насадку по стрелке "Кольцо с выступами".
3. Совместите выступы на кольце с направляющими на корпусе.
4. Поверните замок по стрелке до конца.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


- Элементы питания меняются в зубной щетке и в УФ-стерилизаторе.
- Не вставляйте новые элементы питания влажными руками.
- Рекомендуется использовать элементы питания щелочного типа.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Поверните крышку батарейного отсека по стрелке до щелчка.

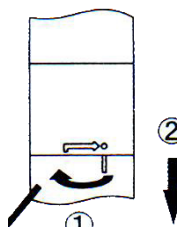

2. Потяните вниз крышку батарейного отсека и снимите ее.

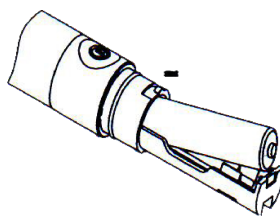

3. Вставьте новый элемент питания, соблюдая полярность.

4. Наденьте крышку батарейного отсека.
5. Поверните по направлению стрелки до конца.

