

YAMAGUCHI



беспроводная массажная подушка
Axiom MATRIX

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Ознакомьтесь с продукцией
компании Yamaguchi можно на
сайте www.yamaguchi.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые особенности.....	4
Меры предосторожности.....	5
Описание деталей.....	7
Использование.....	8
Описание режимов работы.....	8
Устранение неполадок.....	9
Хранение и уход.....	10
Технические характеристики.....	10

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **NEW** Работа массажных роликов от прикосновения телом
- Разминающий роликовый массаж шейно-воротниковой, околосcapочной, поясничной зон и других частей тела
- Четырехроликовый массажный механизм
- 2 режима массажа
- Таймер: 15 минут
- 2 направления вращения роликов
- Снятие усталости и стресса
- Массажер работает от аккумулятора, что позволяет всегда брать с собой и использовать дома, в офисе или на отдыхе

Комплектность товара:

- массажная подушка x 1
- шнур питания с сетевым адаптером x 1
- руководство пользователя x 1
- упаковочная коробка* x 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Сохранность и эффективное использование массажной подушки возможны только в случае ее применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите подушку и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться массажером без присмотра со стороны.
- Не вставляйте на подушку ногами и не помещайте на нее тяжелые предметы.
- Не используйте подушку в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте подушку вблизи раскаленных предметов.
- Следите за тем, чтобы шнур питания с сетевым адаптером не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться подушки влажными руками!
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование подушки и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Запрещено погружать подушку в воду или другие жидкости во время ее очистки.
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.
- Не рекомендуется пользоваться массажной подушкой во время движения автомобиля.

ВНИМАНИЕ!




- **Не** используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- **Не** просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажной подушки.
- **Не** используйте массажную подушку в помещениях, где распыляются аэрозольные препараты.
- **Не** накрывайте чем-либо массажную подушку в процессе работы.
- **Не** используйте массажную подушку дольше, чем 15 минут за один сеанс во избежание ее перегрева.
- **Не** используйте массажную подушку в качестве замены лечению.
- **Не** используйте массажную подушку перед сном, так как массаж оказывает бодрящее воздействие.

При наличии одного из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажной подушки:


- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при высоком давлении;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

Массажная подушка **Yamaguchi Axiom MATRIX** не предназначена для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

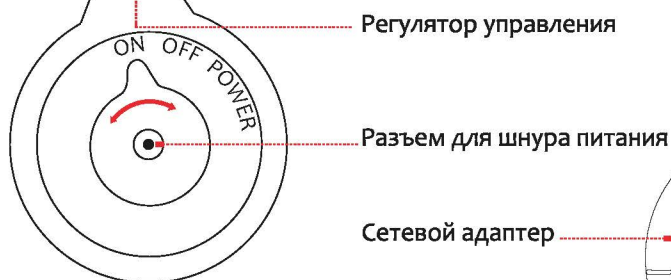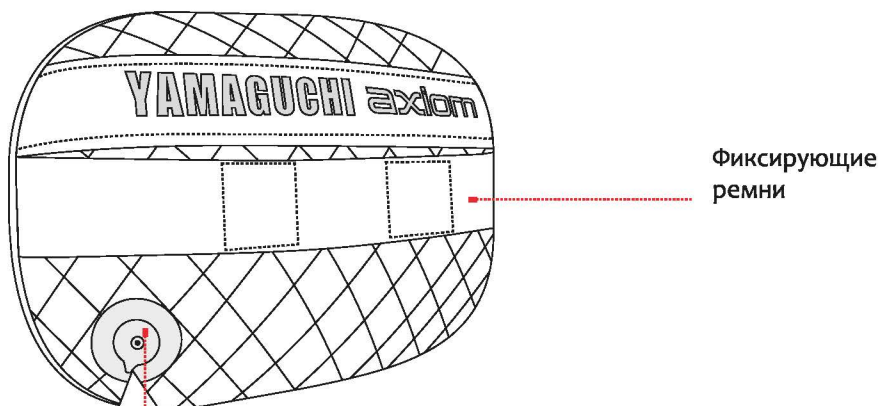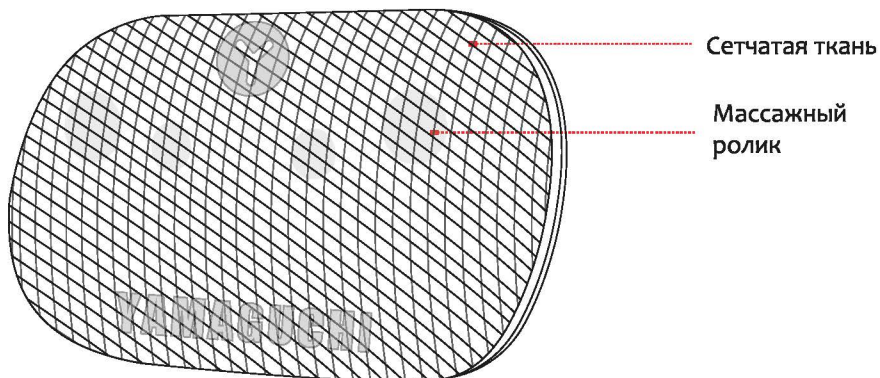

Сетевой адаптер

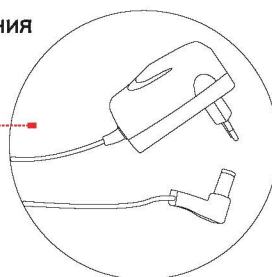

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор массажной подушки. Для этого:

- подключите сетевой шнур с адаптером к соответствующему разъему на корпусе массажной подушки;
- подключите шнур к сети 220В;
- начнется зарядка массажной подушки, при этом световой индикатор на корпусе загорится красным цветом, а после окончания зарядки - зеленым;
- время зарядки 3 часа.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Закрепите подушку на стуле или кресле при помощи фиксирующих ремней, расположенных на задней поверхности подушки.
- Используйте регулятор управления (стр.7) для включения массажной подушки.
- Выберите нужный режим массажа:

ON - работа роликов от прикосновения телом


POWER - независимая работа массажных роликов

Направление движения механических роликов будет попеременно меняться каждые 2 минуты.


- Через 15 минут подушка выключится автоматически.
- Для немедленного завершения сеанса массажа переключите регулятор управления в положение OFF.

Внимание! Если Вы не используете подушку более 10 минут, всегда переводите регулятор управления из положения ON/POWER в положение OFF. В противном случае срок эксплуатации батареи значительно сократится.


Варианты использования массажной подушки:

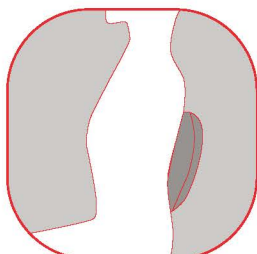

ПОЯСНИЦА

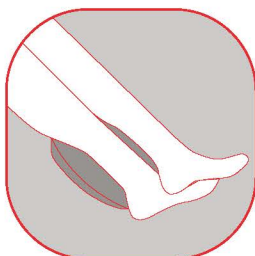

НОГИ

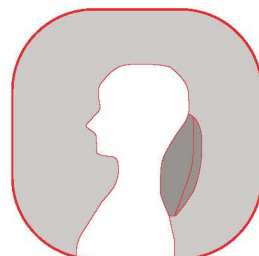

ШЕЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы массажера слышен шум	Шум вызван работой механизмов внутри массажера	Это нормальное явление, шум не является неисправностью аппарата
Аппарат не работает	Массажер не включен	Включите массажную подушку, для этого переключите регулятор управления в положение ON или POWER
	Аккумулятор разрядился	Необходимо зарядить аккумулятор
Внезапное прекращение работы	Сработал автоматический таймер отключения	Выберите режим массажа

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение

- Поместите аппарат в упаковку.
- Храните подушку в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань обивки.
- Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания вокруг подушки.
- Не подвешивайте подушку за шнур питания.

Уход

- Прежде чем начать чистить изделие дайте ему остыть.
- Очищайте корпус массажной подушки мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте подушку в воду или в другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Беспроводная массажная подушка
Модель	YAMAGUCHI Axiom MATRIX
Мощность	29 Вт
Питание	встроенная Li-Ion батарея 10,8 В; 2100 мАч
Напряжение	14,5 В 2А
Таймер	15 мин
Габариты (ДхШхВ)	350×220×125 мм
Вес	1,6 кг



YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.