



Умные весы Picooc S3 Lite

руководство пользователя





Тип товара: смарт-весы

Характеристики


- Диапазон измерений: 8–150 кг
- Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth
- Совместимость: мобильные устройства с операционными системами iOS 8.0 / Android 4,3 и новее
- Проводящая поверхность: электропроводящая пленка ITO
- Толщина стекла: 6 мм
- Тип элементов питания: батарейки AA x 4 шт. (входят в комплект поставки)
- Размеры: 340 x 260 x 15 мм
- Вес: 1,64 кг
- Размеры упаковки: ~370 x 300 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~2500 г
- Страна: КНР

Соединение

01 Откройте упаковку и вставьте батарейки.



Удалите прозрачную защитную пленку, откройте крышку отсека батареек на обратной стороне весов, установите батарейки и закройте крышку.

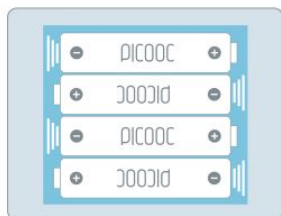

02 Пожалуйста, сохраните руководство и передавайте его другим перед использованием устройства, руководство должно быть включено в комплект.

Для старых аккаунтов, пожалуйста, выберите "Настройки – Управление устройством" в приложении PICOOC, выберите знак "+", а затем действуйте в соответствии с руководством.



Вы также можете найти приложение PICOOC в App Store или Google Play.

* Некоторые методы соединения могут измениться в связи с обновлениями приложения, пожалуйста, следите за последними версиями.

Определение веса.

- 01** Перед взвешиванием, для обеспечения точности, пожалуйста, расположите устройство на твердой и ровной поверхности.

Погрешности могут быть больше для следующих пользователей:

Растущие дети

Лица пожилого возраста

Люди, испытывающие озноб из-за простуды и т.п.

Пациенты с остеопорозом с очень низкой минеральной плотностью костей

Пациенты с отечностью

Пациенты с искусственным диализом

Лица, занимающиеся фитнесом или спортом (или аналогичными занятиями)

Пожалуйста, максимально избегайте использования весов в следующих ситуациях:

После интенсивных физических упражнений

После сауны или ванны

После сильного опьянения

После употребления большого количества воды и еды

- 02** Нажмите "Измерить" в приложении и используйте устройство, будучи босиком


* Измерение босиком обязательно для правильного определения количества жира и других данных

* Пожалуйста, становитесь на устройство правильно: определите центр и расположите ступни симметрично с обеих сторон.

* Слишком близкое расположение к краю может привести к переворачиванию устройства и причинить травмы, либо повлиять на точность измерения.



- 03 Числовые LED-показатели могут меняться на протяжении нескольких секунд во время измерения. После окончания измерения колебание прекратится и появится обозначение веса.

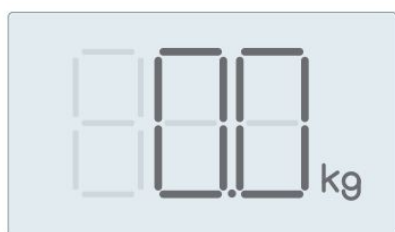

- 04 Когда измерение успешно закончится, данные отправятся в приложение PICOOC, и вы сможете проверить измерения и анализ полученных данных в своем приложении.



* Любые данные или рекомендации в приложении носят исключительно ознакомительный характер, они не обозначают и не заменяют профессиональную диагностику медицинских учреждений

Гарантии и техническая поддержка.

Для знакомства с гарантийными условиями и условиями технического обслуживания вы можете проконсультироваться со своим дилером. Вы можете ознакомиться с информацией о дилерах, а также узнать больше об устройстве на соответствующих веб-сайтах. <http://www.picooc.com/en>



Комплектация

- Умные весы Picoos S3 Lite
- Батарейки AA - 4 шт.
- Документация

Страна: КНР