



магазин
инноваций



Массажер для ног

HoMedics

FMS-350H-EU



**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННО
В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:**

- ВСЕГДА отсоединяйте электрический прибор от (из) розетки сразу после использования и перед очисткой. Для того, чтобы отсоединить прибор, установите все элементы управления в положение 'OFF' (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем выньте штепсель из розетки.
- Никогда не оставляйте электрический прибор без внимания, когда он включен. Отключите (Отсоедините) его от розетки электрической сети, когда он не используется и перед тем, как подсоединить или снять компоненты или насадки.
- Данный прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет; лицами с физическими и умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования такого прибора, под присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного использования, а также относительно возможного риска. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.
- НЕ доставайте прибор, если он упал в воду или другие жидкости. Отключите сеть электроснабжения и немедленно отсоедините прибор от (из) розетки. Держите прибор в сухом состоянии – НЕ пользуйтесь им в сырьих или влажных условиях.
- НИКОГДА не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
- Используйте этот прибор только по его предназначению, как описано в этом буклете. НЕ используйте насадки, не рекомендованные компанией Хомедикс (HoMedics).
- НИКОГДА не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. Передайте прибор в центр технического обслуживания HoMedics или другому специалисту аналогичной квалификации для проверки и ремонта.
- Держите провод в стороне от нагретых поверхностей.
- Чрезмерное (Длительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и сократить срок его службы. Если это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему остыть перед тем, как использовать его снова.
- НИКОГДА не роняйте или не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на приборе.
- НЕ пользуйтесь прибором там, где был (была) использован (использована) аэрозоль (распыленная жидкость) или там, где был применен кислород.
- НЕ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. Прибор может перегреться и вызвать пожар, поражение электрическим током или ранение.
- НЕ носите прибор за провод и не используйте провод в качестве ручки.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения внутри помещений.
- НЕ раздавливайте прибор. Избегайте резкого сгибания.
- Этому прибору требуется источник переменного тока напряжением 220-240 В.
- НЕ пытайтесь (самостоятельно) ремонтировать прибор. В приборе нет никаких деталей, которые требуют обслуживания потребителем. Для обслуживания отошлите прибор в центр обслуживания компании Хомедикс. Всё обслуживание этого электрического прибора должно производиться только специалистами, авторизованными компанией Хомедикс.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не помещайте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не засорялись волокнами, волосами и т. п.
- Не кладите прибор туда, откуда он может упасть или соскользнуть в ванну или раковину. Берегите прибор от контакта с водой и другими жидкостями.
- Несоблюдение вышеперечисленного может привести к риску пожара или ранения.
- Вы можете получить ожоги из-за неправильного использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР.**

- Если Вы беспокоитесь относительно Вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого прибора.
- Люди с электронными стимуляторами сердца и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого прибора. Не рекомендуется использовать прибор лицам, страдающим сахарным диабетом.
- НЕ используйте прибор на младенцах, больных или на спящих или находящихся в бессознательном состоянии людях. НЕ используйте прибор на нечувствительной коже или на человеке с плохим кровообращением.
- Этот электрический прибор НИКОГДА не должен использоваться кем-либо, имеющим физическое заболевание, которое может ограничить возможности манипулировать элементами управления или кем-либо, имеющим недостаточную чувствительность в нижней половине тела.
- НИКОГДА не используйте прибор непосредственно на опухших или воспаленных участках тела или на высыпаниях на коже.
- Если Вы чувствуете какой-либо дискомфорт при использовании этого прибора, прекратите им пользоваться и проконсультируйтесь с Вашим врачом.
- Это непрофессиональный электрический прибор, сконструированный для индивидуального использования и предназначенный для выполнения успокаивающего массажа уставших мышц. НЕ используйте прибор в качестве замены медицинской помощи.
- НЕ используйте прибор перед тем, как ложиться спать. Массаж производит стимулирующий эффект и может замедлить процесс засыпания.
- Не используйте прибор дольше рекомендованного времени.
- Нагревающиеся поверхности должны быть использованы с осторожностью. Если Вы чувствуете, что прибор перегрелся, отключите его от розетки и свяжитесь с центром обслуживания компании Хомедикс.
- Не рекомендуется для использования на кожаной мебели.
- Необходимо следить за тем, чтобы в массажный механизм или какие-либо другие движущиеся части прибора ни в коем случае не попали волосы, одежда или украшения.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Очистка

Перед очисткой отключите прибор от розетки и дайте ему остыть. Очищайте прибор только мягкой, слегка влажной губкой.

- Не допускайте контакта прибора с водой и какими-либо другими жидкостями.
- Во время очистки не погружайте прибор в какую-либо жидкость.
- Никогда не используйте для очистки абразивные очистители, щетки, средства для полировки стекла или мебели, растворители для красок и т. п.


Хранение

Храните прибор в его упаковке или в безопасном, сухом и прохладном месте. Чтобы избежать поломки, НЕ оборачивайте шнур электропитания вокруг прибора. НЕ вешайте прибор за шнур электропитания.

Пояснение WEEE

 Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

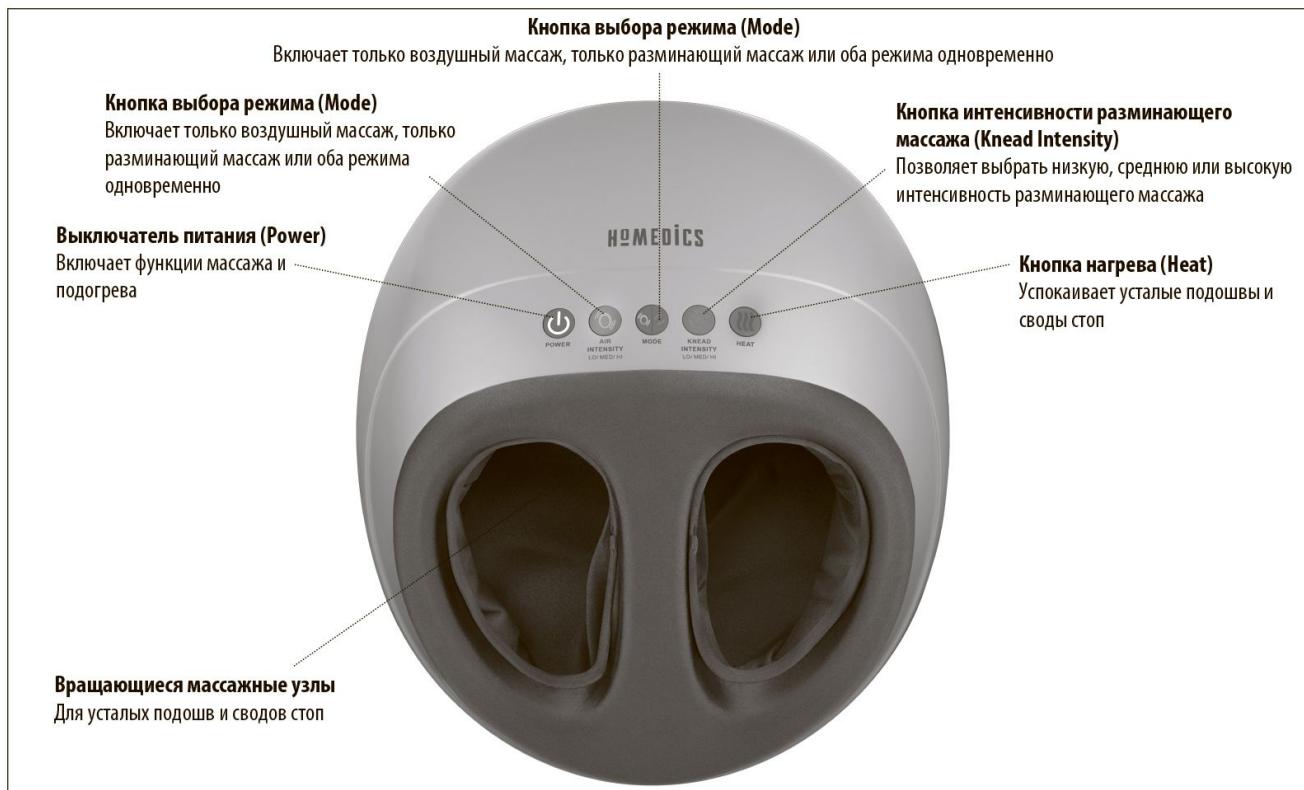

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите прибор к сети электропитания 220–240 В.
- При использовании ножного массажера настоятельно рекомендуется надевать носки. Не используйте прибор в обуви.
- Установите массажер на полу перед столом или сиденьем и поставьте ноги в массажер.
- Чтобы включить функцию массажа, нажмите на кнопку выключателя питания (POWER) один раз. Включение белой подсветки кнопки подтверждает сделанный выбор. Прибор включается в режиме одновременного воздушного и разминающего массажа низкой интенсивности.
- Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку выключателя питания (POWER) один раз.

Интенсивность подачи воздуха (Air Intensity)

- Уровень давления воздуха и интенсивность его воздействия на ноги можно изменять нажатием кнопки интенсивности подачи воздуха (AIR INTENSITY).
- Нажимайте на кнопку выбора режима работы (MODE) до включения подсветки кнопки интенсивности подачи воздуха (AIR INTENSITY).
- Сразу после включения подача воздуха производится с низкой интенсивностью; кнопка интенсивности подачи воздуха (AIR INTENSITY) тускло подсвечена синим.
- Повторное нажатие кнопки повышает давление воздуха до среднего; синяя подсветка кнопки становится ярче.
- Третье нажатие кнопки повышает давление воздуха до высокого; синяя подсветка кнопки приобретает максимальную яркость.
- Последующее нажатие кнопки возвращает прибор в режим низкого давления воздуха.

Выбор режима (Mode)

- Нажатие кнопки выбора режима (MODE) включает прибор в режиме одновременного воздушного и разминающего массажа с низкой интенсивностью. Обе стороны кнопки подсвечиваются.
- Повторное нажатие кнопки переключает прибор в режим только воздушного массажа. Левая сторона кнопки выбора режима (MODE) подсвечивается синим.
- Третье нажатие кнопки переключает прибор в режим только разминающего массажа. Правая сторона кнопки выбора режима (MODE) подсвечивается зеленым.

- Последующее нажатие кнопки возвращает прибор в режим одновременного воздушного и разминающего массажа. Все кнопки интенсивности подачи воздуха (AIR INTENSITY), выбора режима (MODE) и интенсивности разминающего массажа (KNEAD INTENSITY) подсвечиваются.

Интенсивность разминающего массажа (Knead Intensity)

- Интенсивность работы массажного механизма можно изменять нажатием кнопки интенсивности разминающего массажа (KNEAD INTENSITY).
- Нажимайте на кнопку выбора режима работы (MODE) до включения подсветки кнопки интенсивности разминающего массажа (KNEAD INTENSITY).
- Сразу после включения массаж производится с низкой интенсивностью; кнопка интенсивности разминающего массажа (KNEAD INTENSITY) тускло подсвечена зеленым.
- Повторное нажатие кнопки повышает интенсивность массажа до средней; зеленая подсветка кнопки становится ярче.
- Третье нажатие кнопки повышает интенсивность до высокой; зеленая подсветка кнопки приобретает максимальную яркость.
- Последующее нажатие кнопки возвращает прибор в режим низкой интенсивности.

Подогрев (Heat)

- Для включения успокаивающего подогрева сначала выберите режим воздушного (AIR) или разминающего (KNEAD) массажа. Затем нажмите на кнопку нагрева (HEAT); при этом включится красная подсветка кнопки.
- Чтобы отключить подогрев, нажмите на кнопку еще раз; подсветка кнопки погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения вашей безопасности подогрев может быть включен только при включенном программе воздушного и/или разминающего массажа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- НЕ ВСТАВАЙТЕ на ножной массажер. Используйте его только в сидячем положении.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ непрерывного использования функций массажа или подогрева в течение более 15 минут.
- Для обеспечения безопасности предусмотрено автоматическое отключение прибора через 15 минут работы. Эта функция не заменяет выключения прибора (OFF). Обязательно выключайте прибор, когда он не используется.

HOMEDICS®

CE

IB-FMS350H-EU-0715-02