




US Medica Nephrite Therapy

руководство пользователя



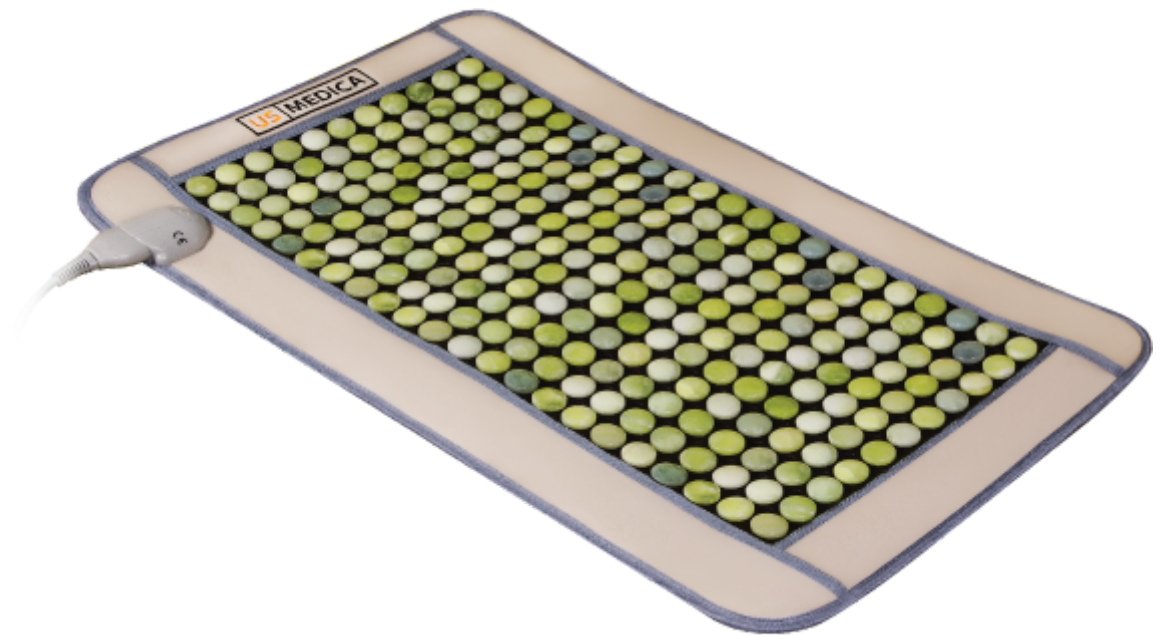

1. **Тип товара:** массажный коврик с подогревом
2. **Характеристики**
 - Материалы: нефрит, термостойкий арпате́к
 - Количество нефритов: 242
 - Напряжение питания: 220 В
 - Максимальная мощность: 100 Вт
 - Диапазон температуры: 30° - 70° С
 - Максимальная нагрузка: 120 кг
 - Вес коврика: 3,3 кг
 - Габариты (Д x Ш): 79 x 48 см



3. Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Сохранность и эффективное использование нефритового коврика возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым использованием нефритового коврика осмотрите его и убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования нефритового коврика проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет его использовать.

Во время использования нефритового коврика следите за своим самочувствием. Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться нефритовым ковриком без присмотра со стороны.

Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте нефритовый коврик в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током. Не используйте нефритовый коврик вблизи раскаленных предметов.

Ни в коем случае не используйте нефритовый коврик при видимых повреждениях шнура или вилки! Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания. Обязательно отключайте устройство от сети после использования. Запрещено касаться коврика влажными руками.

При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время терапии с нефритовым ковриком немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.


Запрещено погружать нефритовый коврик в воду или другие жидкости во время его очистки. Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару. Не используйте прибор на улице.

Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии. Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.


Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления. Это касается цвета и комплектующих изделия.

Противопоказания: При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов; При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях; При острых заболеваниях; При наличии гипертермии; Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует использование); Если тело человека влажное; При чувствительности к тепловому прогреванию.

4. Устройство коврика

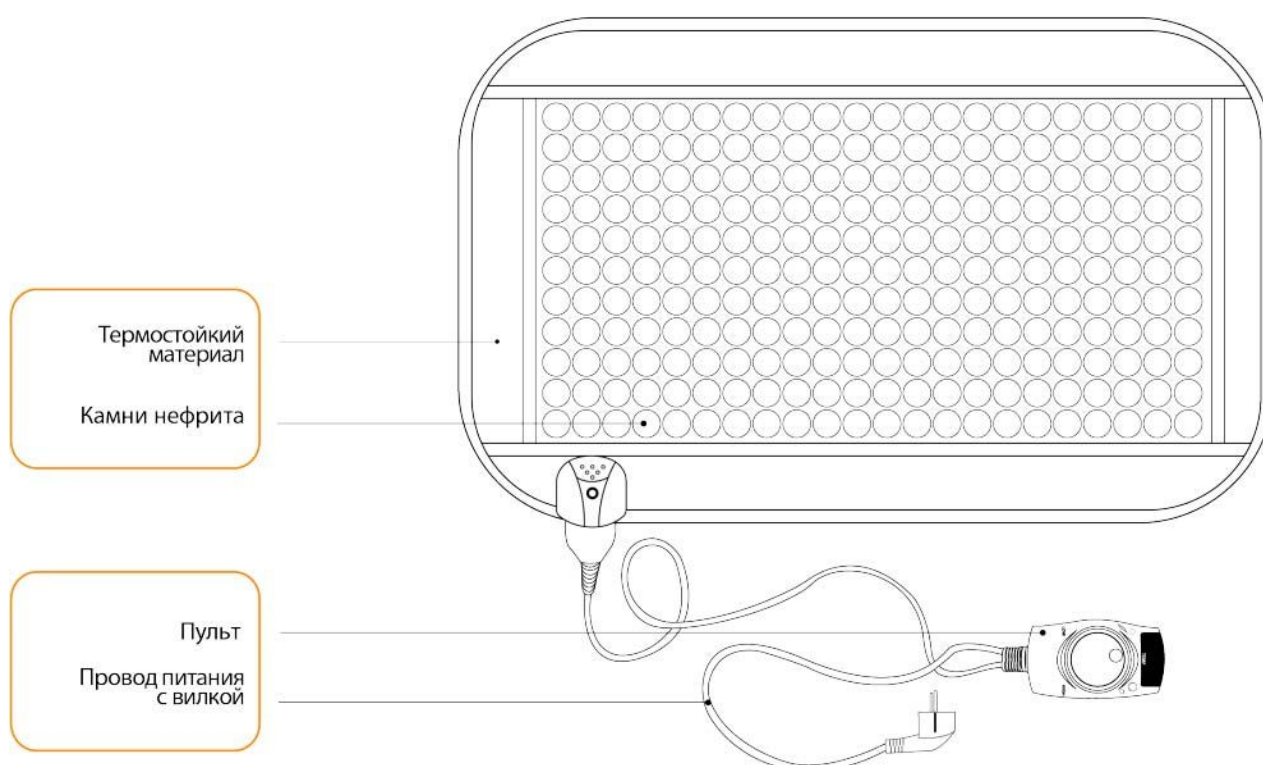

5. Пульт управления

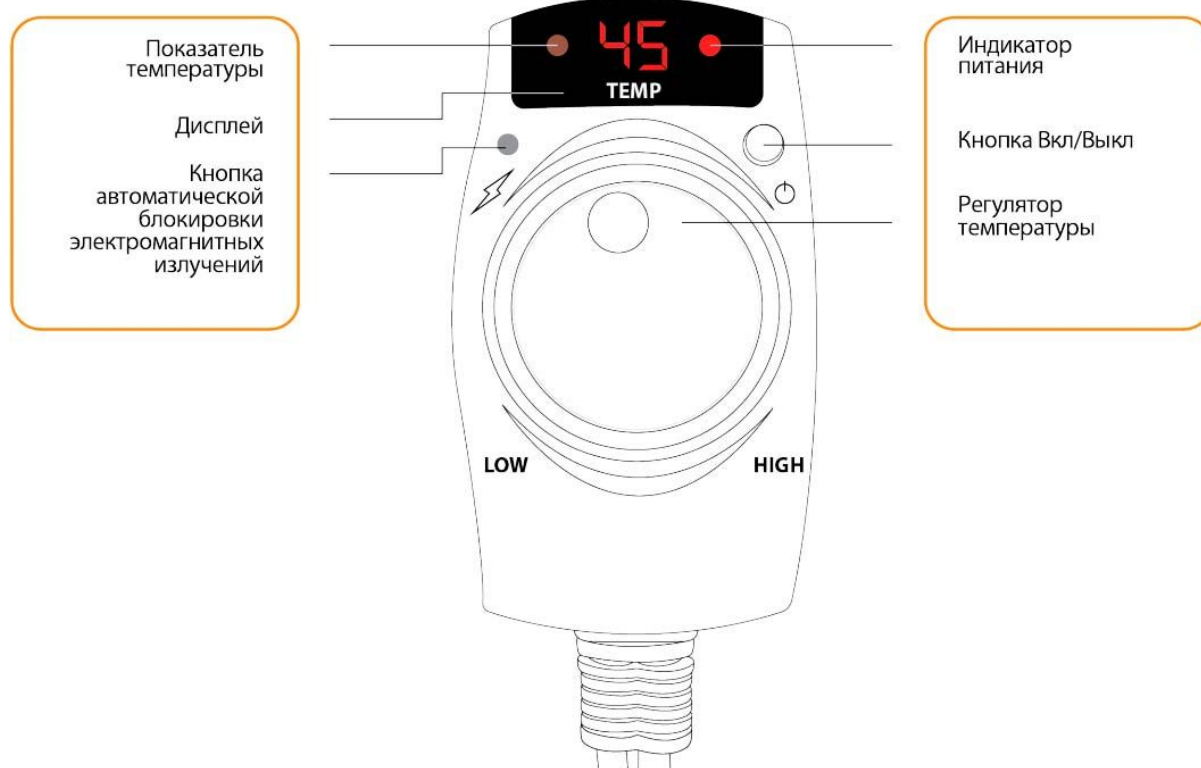

6. Использование коврика

- Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
- Для включения устройства нажмите кнопку “Питание” на пульте. При этом на дисплее отобразится исходная температура коврика.
- Поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите нужную температуру (выбранная температура отображается на дисплее в течение 3 секунд, затем - исходная температура коврика).
- По мере нагревания коврика температура будет повышаться, пока не достигнет заданной, что отобразится на дисплее. Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15-20 мин.
- Для выключения коврика после его использования еще раз нажмите кнопку включения и отключите провод питания от сети.



7. Температурные режимы

- Прогрев до 45 градусов. Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и гормональную систему. Не имеет противопоказаний для использования.
- Прогрев от 45 до 55 градусов. Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет мышцы.
- Прогрев от 55 до 70 градусов («прижигание»). Уникальный режим нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.

8. Хранение и уход

Хранение

- Поместите коврик в упаковку.
- Храните нефритовый коврик в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения нефритового коврика с острыми или режущими предметами, которые могут его повредить.
- Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

Уход

- Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте остыть.
- Очищайте изделие мягкой сухой тканью.
- Во время чистки не погружайте нефритовый коврик в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.



9. Комплектация

- Нефритовый коврик US Medica Nephrite Therapy
- Пульт управления
- Инструкция

10. Страна-изготовитель: США