



Velvet

Руководство пользователя





■ Описание и назначение прибора

Массажер для ног «Velvet» оказывает комплексное воздействие на стопы, тщательно прорабатывая каждую точку, благодаря вращающимся массажным роликам и воздушно-компрессионным подушкам, встроенных в массажер. В приборе есть возможность выбрать программу, наиболее комфортную для пользователя - отдельно роликовый массаж или только воздушно-компрессионный массаж или комбинированный.

- 5 различных программ роликового и воздушно-компрессионного массажа ног,
- 3 режима интенсивности,
- функция прогрева,
- автоматическое отключение через 15 минут, но также возможность установить желаемое время от 5 до 30 минут.

Благодаря такому набору функций массажер тщательно разминает стопы, дарит наслаждение и пользу, избавляет от усталости, расслабляет, снимает напряжение и тяжесть.

А стильный и компактный дизайн массажера впишется в любой интерьер как дома, так и в офисе.



Меры предосторожности

Внимательно прочтите инструкцию по безопасному использованию прибора и придерживайтесь их во время применения.

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры безопасности:

- Отключайте прибор от сети после окончания сеанса массажа и перед чисткой.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра и отключайте каждый раз после использования.
 - Не накрывайте прибор одеялом или одеждой во время его использования. Перегрев прибора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - Требуется повышенное внимание взрослых при использовании прибора в непосредственной близости от детей и людей с ограниченными возможностями.
 - Запрещается использование прибора в коммерческих целях.
- В случае поломки или обнаружения неисправностей отключите устройство и передайте специалисту сервисного центра.
- Не используйте массажер в случае поврежденного электропровода, штепсельной вилки, а также, если в работе устройства наблюдаются сбои.
 - В случае падения прибора, повреждения или попадания в воду, необходимо незамедлительно отключить устройство от сети и связаться со специалистом сервисного центра.
 - Не тяните, не передвигайте и не подвешивайте прибор за электропровод.
 - Держите электропровод вдали от огня и нагретых поверхностей.
 - Содержите устройство в чистоте, регулярно очищайте от пыли, загрязнений и влаги.
 - Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора во время использования.
 - Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия.
 - Не используйте прибор на открытом воздухе. Устройство предназначено исключительно для эксплуатации в домашних условиях.
 - Не используйте прибор в помещениях с распыленными аэрозолями и легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами.
 - Для отключения прибора от сети необходимо вначале выключить работы всех программ, а затем отключить устройство от розетки.

Внимание! В следующих случаях необходима консультация врача перед началом использования прибора:

- Серьезные заболевания;
- Наличие кардиостимулятора и прочих электронных устройств в организме;
- Беременность;
- Плохое самочувствие;
- Недавно перенесенные травмы или текущее лечение;
- Присутствие боли или неприятных ощущений в любой части тела;
- Алкогольное или наркотическое опьянение;
- Во время сна или очень сильной усталости.



Меры предосторожности

Опасность! Соблюдайте нижеперечисленные правила для предотвращения поражения электрическим током или возгорания.

- Не используйте прибор во время водных процедур или купания.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната, и т.д.).
- Не опускайте прибор в воду.
- В случае попадания прибора в воду, необходимо незамедлительно отключить его от сети и связаться со специалистом сервисного центра.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой (баня, сауна и т.д.).
- Удалите все металлические предметы с одежды и тела во время использования прибора (булавки, застёжки, украшения и т.д.).

Предупреждение!

- Использование прибора детьми возможно только под наблюдением ответственных лиц.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Отключайте прибор от сети, если оно не используется в течение длительного времени.
- Использование прибора допускается только в положении сидя. Запрещается вставать на прибор.
- Устройство должно быть расположено вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как радиаторы, электрические печи, обогреватели и т.д.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия прибора не были закрыты стоящими рядом предметами, например, кроватью, диваном и т.д.
- В случае поломки прибора не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, обратитесь к специалисту в сервисный центр.
- Не тяните за электропровод прибор во время его отключения от сети.
- Не используйте прибор на влажном теле, это может привести к поражению электрическим током.
- Запрещается использование в случае повреждения корпуса или элементов прибора.
- Не вставляйте, не садитесь и не кладите на прибор тяжелые предметы.
- Запрещается использование прибора во время сна.
- Запрещается использование прибора в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Рекомендованное время использования прибора составляет 15 минут.


Необходимо незамедлительно прекратить использование прибора, если:

- на него пролилась жидкость
- вы чувствуете сильную боль
- появились неисправности в работе прибора
- присутствуют сбои в электропитании

! Во время сеанса массажа и после него возможно ощущение легкого зуда в ногах. Данное ощущение является нормальным и является результатом ускорения циркуляции крови.



Схема прибора

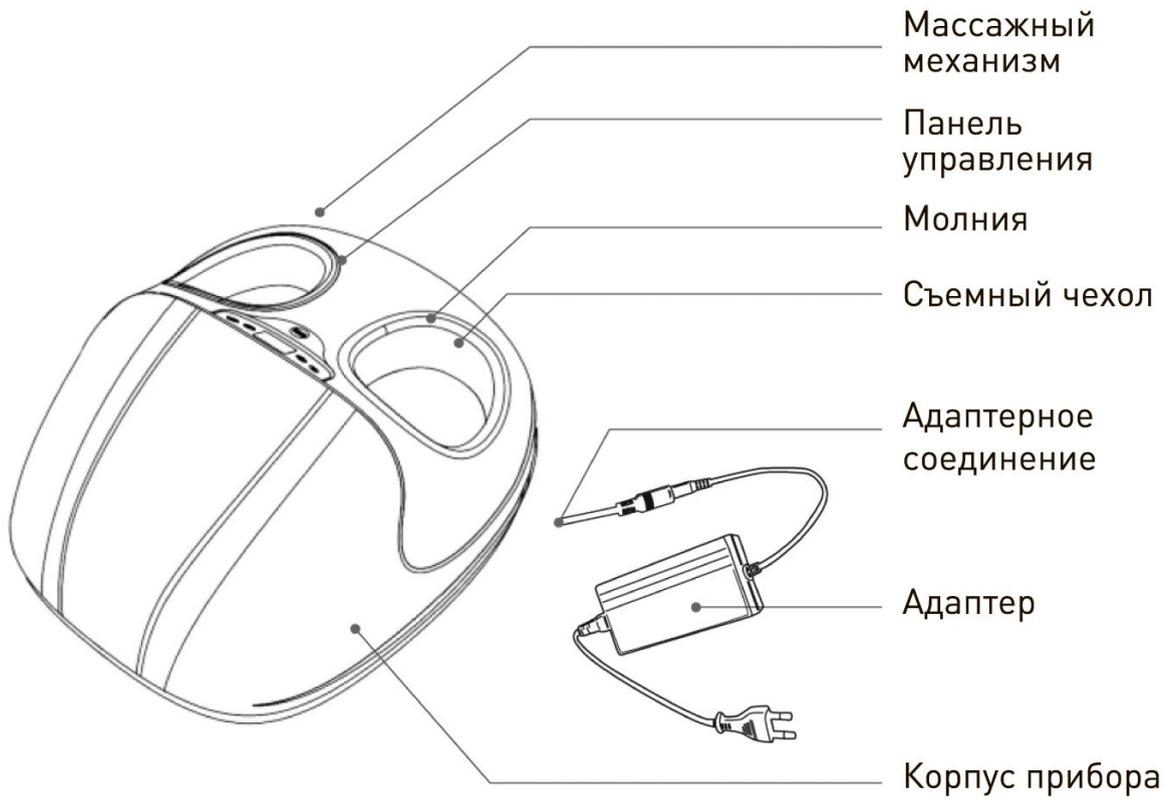


Управление и функции

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Соедините массажер с адаптером и подключите шнур питания к сети.
2. Сядьте на стул или на пол и поместите ноги в массажер.
3. На панели управления установите нужный режим массажа.
4. После использования отсоедините шнур питания.



POWER. Кнопка для включения и выключения сеанса массажа. По умолчанию автоматическое время отключения через 15 минут. В конце сеанса массажа система автоматически отключается.

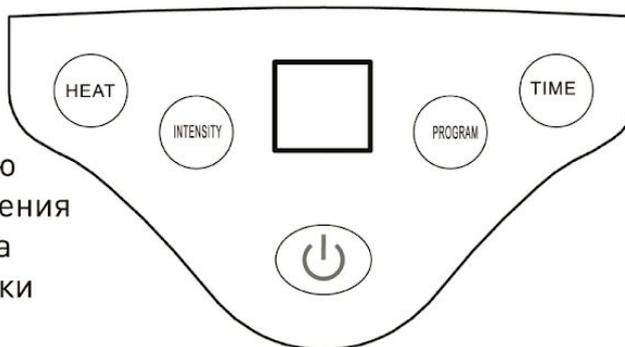

TIME. Кнопка для установления периода сеанса массажа. 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 минут.



INTENSITY. Кнопка для регулировки интенсивности воздушно-компрессионного массажа (низкий, средний, высокий). L3-высокое давление, L2 - среднее давление, L1 - низкое давление. L1, L2, L3 отображаются на светодиодном окне. По умолчанию стоит L1.



PROGRAM. Кнопка для выбора одной из 5 программ массажа. Последовательно нажимайте данную кнопку для выбора одной из программ.
P1, P2, P3 режимы – это разные варианты совместного роликового и воздушно-компрессионного массажа.
P4 – режим только роликового массажа.
P5 – режим только воздушно-компрессионного массажа



HEATING. Кнопка функции нагрева. При желании можно включить нагрев, чтобы отключить данную функцию, нажмите эту же кнопку еще раз.



Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вилка не вставлена в розетку. 2. Массажер не включен. 3. Закончился сеанс массажа и прибор автоматически отключился. 4. Слишком долгая работа прибора, перегрев прибора. 5. Слишком сильное давление на массажные ролики. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставьте вилку в розетку. 2. Нажмите кнопку ON/OFF. 3. Промежуток между сеансами массажа должен составлять 10-15 минут. Если вы хотите продолжить массаж, нажмите повторно кнопку ON/OFF. 4. Выключите прибор, дайте ему остыть, затем можете использовать прибор повторно. 5. Слишком сильное давление на ролики.
Электрический шнур поврежден, массажер дымится	Повреждение шнура	Немедленно отключите массажер от сети и свяжитесь со специалистом сервисного центра

Обслуживание и уход

Хранение

Если прибор не используется длительное время, необходимо упаковать его в коробку и поместить в сухое, проветриваемое место комнатной температуры.

Не дергайте за провод питания во время отключения прибора от сети. Осторожно! Острые предметы могут поцарапать поверхность прибора. Храните прибор вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Чистка

Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от розетки. Для очистки корпуса прибора используйте мягкую сухую ткань. Тканевое покрытие внутренней стороны части прибора можно протереть влажной тканью и высушить естественным путем.

Внимание! Не используйте для чистки средства с разъедающими веществами, бензином и растворителем.

Обслуживание

Храните прибор вдали от высокой влажности.



■ Технические характеристики

Артикул	GESS-610
Напряжение, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	50
Автоматический таймер, мин	15
Вес нетто/брутто, кг	4,1 / 5,60
Размер упаковки, мм	440x275x470