



магазин
ИННОВАЦИЙ



Массажер Gezatone Sky Step

руководство пользователя



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции марки Gezatone и поздравляем с удачной покупкой!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия и сохраните ее на будущее!

Массажер для ног Gezatone «SKY STEPS», модель AMG719 - это инновационный прибор, который сочетает в себе функции разминающего массажа, прессотерапии и восстанавливающего массажа Шиацу. Такой интенсивный глубокий массаж благотворно влияет на здоровье всего организма, стимулирует акупунктурные точки, расположенные на стопе, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение.

Благодаря массажу Шиацу снимается напряжение в мышцах и суставах, восстанавливается нормальное кровоснабжение, стимулируется вывод застоявшейся жидкости.

Воздействие роликами на активные точки стопы производит эффект рефлексотерапии, открывает энергетические каналы, способствует восстановлению общей работоспособности, снимает дискомфорт и усталость ног.

Прессмассаж - методика воздействия на кожу и подкожные ткани с помощью давления воздуха, которое усиливает приток крови к тканям, помогает снять напряжение мышц, улучшает работу сосудов, превосходно снимает отеки.

Тепловое воздействие улучшает местное кровообращение, стимулирует работу сосудов, устраняет дискомфорт в суставах и мышцах. Используйте массажер Gezatone «SKY STEPS», модель AMG719 всего 15 минут в день, и Вы почувствуете улучшение общего самочувствия и настроения!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

1. Прессмассаж снимает спазм мышц и усталость ног.
2. Массаж Шиацу воздействует на акупунктурные точки стопы, что дает общий оздоравливающий эффект.
3. Регулярный массаж улучшает самочувствие и настроение.
4. Использование массажера для ног является прекрасной профилактикой варикоза и заболеваний суставов.
5. Прогревание устраняет дискомфорт в мышцах и суставах.
6. Массаж стоп – это идеальный способ расслабиться и снять напряжение после тяжелого дня.
7. Возможность выбрать режим работы и настроить прибор, как это удобно Вам!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



Нельзя использовать массажер для ног:

- Во время беременности.
- Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор.
- При туберкулезе.
- При онкологических заболеваниях.
- При флебите или тромбозе вен.
- При диабете.
- При заболевании кожи.
- При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри.
- При дисфункции суставов, как, например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
- При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.
- При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет.





Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь со специалистом.

ВНЕШНИЙ ВИД

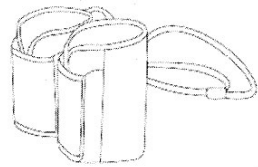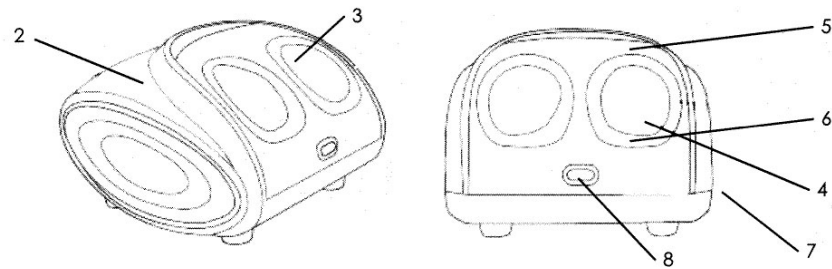

внешние
воздушные манжеты

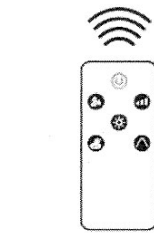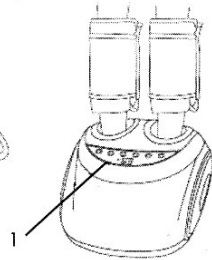

пульт дистанционного
управления

1. Панель управления: управление массажными функциями прибора
2. Расположение массажных роликов: массаж переднего отдела стопы
3. Расположение массажных роликов шиацу: массаж подошвенной дуги
4. Расположение роликов для разминающего массажа: массаж пяток
5. Расположение воздушной подушки: обеспечение массажа воздушным давлением
6. Съемное и моющееся тканевое покрытие
7. Разъем подключения блока питания
8. Разъем для подключения внешних воздушных манжет

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- индикатор таймера



External

- кнопка внешнего устройства включает и выключает внешние воздушные манжеты



Mode

- кнопка выбора режимов массажа:
1 режим - зеленый индикатор,
2 режим - желтый индикатор,
3 режим - красный индикатор



Strength

- кнопка выбора интенсивности массажа. доступны 3 режима, отображающихся цветом индикатора:
легкий режим - зеленый индикатор,
средний режим - желтый индикатор,
режим высокой интенсивности - красный индикатор



Heat

- кнопка подогрева. Включает и отключает режим подогрева. При включенном подогреве индикатор подсвечен красным. По умолчанию при включении прибора подогрев включен




Roll

- включение и выключение прессотерапии. При нажатой кнопке загорается красный индикатор, воздушные камеры прессотерапии отключаются, кнопки выбора интенсивности и переключения режимов становятся не активны. Происходит только массаж стопы с помощью массажных роликов. По умолчанию при включении прибора выбран режим прессотерапии.



Power

- включение и выключение прибора. Все кнопки управления дублируются на пульте ДУ

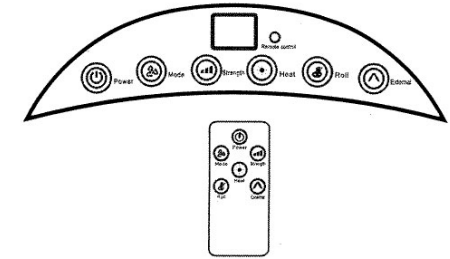

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Начало работы

- Подключите массажер к розетке переменного тока. Включится светодиодный индикатор. Массажер для ног готов к работе.
- Нажмите кнопку "вкл\выкл", загорится красная подсветка кнопки, на индикаторе таймера отобразится время до окончания массажа (общая длительность массажа - 15 минут). По умолчанию включен режим 1, интенсивность средняя, подогрев включен.
- Кнопка "нагрев" включает и выключает нагрев во время проведения процедур.

Нажатием кнопки «Выбор режима», можно выбрать один из 3-х режимов:

- В процессе работы выбирайте нужный Вам режим нажатием кнопки "Выбор режима" - 1 режим (зеленый индикатор) - чередование комбинации прессотерапии и роликового массажа, 2 режим (желтый индикатор) - чередование прессотерапии, роликового массажа, комбинации 2-х видов массажа, 3 режим (красный индикатор) - только прессотерапия. По умолчанию включен режим 1.
- Во время проведения процедуры можно менять интенсивность массажа нажатием на кнопку выбора интенсивности - индикатор светится зеленым - низкая интенсивность, желтым- средняя, красным - высокая.
- Кнопкой включения и выключения прессотерапии можно выбрать комбинированный массаж (прессотерапия+роликовый), либо выключить прессотерапию и оставить только массаж с помощью массажных роликов. По умолчанию прессотерапия включена.



• Для проведения прессотерапии голеней наденьте внешние воздушные манжеты, как показано на рисунке. Подсоедините разъем внешних воздушных манжет к гнезду на корпусе прибора и нажмите на кнопку включения внешнего устройства.



Массажер автоматически отключается через 15 минут (погрешность измерения таймера +/- 2 минуты). При необходимости выключите прибор раньше, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Вкл./Выкл.».



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте массажер к сети переменного тока, соответствующей указанным техническим характеристикам.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии.
- Не пользуйтесь массажером под одеялом и не накрывайте чем-либо во время использования (например, подушкой).
- Данный массажер предназначен только для использования внутри помещений.
- Не вставляйте и не садитесь на массажер! Запрещается вставлять, когда Ваши ступни находятся внутри массажера, даже если массажер выключен!
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Ни в коем случае не используйте массажер с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не используйте с мокрыми ступнями.
- Не спите во время работы массажера.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте массажер от розетки сразу после использования, перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Не используйте для чистки разъедающие вещества, такие как бензин, ацетон и прочие растворители.
- Для чистки поверхности массажера пользуйтесь только мягкой сухой тканью.
- Если массажер не используется долгое время, свободно оберните шнур вокруг прибора и заверните его в ткань для защиты от пыли.
- Храните аппарат в чистом сухом месте.
- Не располагайте массажер вблизи предметов, излучающих сильное тепло, таких как нагреватели, печи, солнечные лучи.
- Обращайтесь с массажером аккуратно, избегайте сильного давления и воздействия на корпус и места для постановки ступней.
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	КАК ЕЕ ИСПРАВИТЬ
Массажер не работает	1. Возможно, блок питания не включен в розетку.	1. Подключите питание.
	2. Плохой контакт в сетевой вилке или шнуре.	2. Проверьте вилку или шнур, при необходимости обратитесь в сервис-центр.
	3. Кнопка «Вкл./Выкл.» не нажата.	3. Нажмите кнопку.
Прибор прекратил воздействие	1. Возможно, нарушился контакт в вилке или шнуре питания.	Убедитесь, что все подключено верно и надёжно.
	2. Время массажа превысило 15 минут.	Выключите прибор, затем включите его снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц.

Потребляемая мощность: не более 48 Вт

Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.)

Размеры: 455 мм x 320 мм x 470 мм

Вес: 5,2 кг

Температура хранения: 15-85° С

Диапазон рабочих температур: от +10°С до +40°С при влажности от 0 до 65%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа за телом, бытовой электрический, серия (тип) AMG, модель 719, т. м. «Gezatone» – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Пульт ДУ – 1 шт.