

Уходовый прибор Gezatone M1610

руководство пользователя



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА RF LIFTING ULTIMATE m1610

Благодарим Вас за приобретение массажера для лица RF Lifting Ultimate m1610 Gezatone!

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Раздел «Меры предосторожности» необходимо изучить особо внимательно, чтобы избежать небезопасных ситуаций. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Прибор используется исключительно в косметических целях, любое использование в коммерческих и / или медицинских целях запрещено.

Прибор можно использовать только на здоровой коже. Производитель не несет ответственности за любого рода дискомфорт, полученный при использовании на коже, находящейся в процессе лечения.

Сочетание эффективных профессиональных методик в приборе Gezatone RF LIFTING ULTIMATE m1610 позволяет сохранить красоту и молодость кожи.

Методики RF-лифтинга, гальваники, хромотерапии и EMS, объединенные в аппарате, воздействуют на все слои кожи и обеспечивают многоуровневое омоложение, стимулируют процессы синтеза коллагена и эластина, активизируют процессы обновления и восстановления кожи, повышают энергетический потенциал клеток.

Использование прибора RF LIFTING ULTIMATE m1610 заменит несколько профессиональных программ и позволит провести процедуру омоложения с комфортом в домашних условиях.

Деликатное воздействие укрепляет и реструктурирует дерму, оказывает лифтинговое действие, сокращает глубину и выраженность морщин, улучшает цвет лица и возвращает коже молодой вид. Аппарат не повреждает кожу, омоложение происходит естественным образом благодаря активизации собственного потенциала, а не за счет введения чужеродных веществ или агрессивных воздействий.

Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.

ФУНКЦИИ АППАРАТА:

1. ГАЛЬВАНИКА

В приборе гальванические токи выполняют 2 функции в разных режимах: очищение и увлажнение.

ОЧИЩЕНИЕ

Очищение кожи при помощи гальванических токов, процесс омыления жирных кислот кожного сала под воздействием гальванического тока и лосьона. В результате воздействия комедоны превращаются в мыло и легко вымываются из пор.

ИОНОФОРЕЗ / УВЛАЖНЕНИЕ

Гальванические токи способствуют быстрому проникновению в кожу активных компонентов косметических средств и повышают их эффективность (метод «ионофореза»), а также стимулируют процессы выработки коллагена, что способствует повышению упругости и

молодости кожи. В зоне воздействия после процедуры образуется «депо», из которого препарат «работает» постепенно. Период выведения различных веществ из кожного «депо» – от 3 до 20 часов, что обуславливает продолжительное пребывание активных веществ и пролонгированное действие.

2. RF ЛИФТИНГ

Воздействие волнами радиочастотного диапазона вызывает контролируемый прогрев дермы и подкожно-жировой клетчатки.

Прибор Gezatone RF LIFTING ULTIMATE m1610, направляет действие волн в определенные зоны, на необходимую глубину, что позволяет проводить совершенно безопасные и эффективные процедуры.

ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ

Под воздействием волн возникает тепловой эффект, который действует на волокна коллагена и эластина, вызывая трехмерное ремоделирование, а также стимулирует синтез новых молодых волокон, стимулирует восстановительные и обменные процессы.

Старые коллагеновые волокна под действием тепла ремоделируются, т.е. обретают первоначальную упругость и сжимаются, что ведет к укреплению структурного каркаса, повышению плотности кожи и разглаживанию морщин. Наряду с этим стимуляция фибробластов и синтез новых коллагеновых волокон обеспечивает построение молодого каркаса кожи.

КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ ЛИЦА И ТЕЛА.

Прибор также оказывает действие на клетки жировой ткани, ускоряя обменные процессы, и способствует интенсивному выведению жидкости из областей скопления избыточного жира. Кроме того, тепловой эффект в тканях, приводит к активизации микроциркуляции, что также усиливает выведение избыточной жидкости и обменные процессы. За счет дренажа и ускорения обменных процессов происходит уменьшение объемов жировой ткани в области второго подбородка, в проблемных зонах тела. Благодаря радиочастотному воздействию, уменьшение объемов происходит без нежелательных побочных эффектов: дряблости и «обвисшей» кожи.

Направленное действие на глубокие слои кожи и подкожно-жировую клетчатку полностью исключает перегрев эпидермиса, благодаря чему

процедуры с применением аппарата комфортны и не требуют реабилитационного периода.

3. EMS (ЭМС, ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ)

ЭМС используется долгое время косметологами всего мира в программах омоложения и применяется в физиотерапии для укрепления и восстановления мышц, что помогает сотням тысяч людей каждый год.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ МЫШЦ ЛИЦА

Методика электромиостимуляции (ЭМС) тренирует мышцы лица, имитируя их естественные сокращения. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют движением мышц и заставляют их сокращаться естественным образом.

Основу лица составляют мышцы, которые с возрастом становятся слабее и нуждаются в тренировке, как и другие мышцы тела. Прибор укрепляет лицевые мышцы, восстанавливая прежнюю форму лица.

ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи и разглаживает морщины, лицо приобретает четкие контуры.

При интенсивной тренировке мышцам необходима дополнительная энергия, источником которой является жировая ткань, поэтому ЭМС великолепно уменьшает объемы избыточного жира в области щек и «второго» подбородка.

Одновременно с увеличением тонуса мышц и подтяжкой кожи, ЭМС стимулирует кровообращение, что способствует насыщению кислородом, выведению токсинов, улучшает и освежает цвет лица.

4. ХРОМОТЕРАПИЯ

КРАСНЫЙ СВЕТ (длина волны 650 нм)

Красный свет проникает глубоко в ткани, поглощаясь в эпидермисе и дерме, около 25% энергии доходит до подкожно-жировой клетчатки.

Красный свет стимулирует синтез коллагена, ускоряет рост новых сосудов, способствует выравниванию тона кожи и улучшает цвет лица.

Повышает устойчивость кожи к воздействию внешних факторов (холод, ветер, загрязнения окружающей среды). Тонизирует, повышает увлажняющую способность кожи за счет стимуляции выработки натурального увлажняющего фактора. Одним из положительных эффектов воздействия на кожу красным светом является повышение местного иммунитета и активизация восстановительных процессов, что способствует наиболее быстрой репарации повреждений.

СИНИЙ СВЕТ (длина волны 465 нм)

Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие, обладает выраженными антибактериальными свойствами. Оказывает положительное влияние на внешний вид и состояние кожи, стимулирует местный иммунитет, успокаивает раздраженную кожу. Активизирует процессы регенерации и репарации. Использование синего света позволяет снизить воспаление и раздражение, оказывает профилактическое действие и предотвращает высыпания на коже в будущем.

5. ВИБРАЦИЯ

Мягкая микро-вибрация, используемая в режимах очищения и увлажнения, помогает веществам лучше проникать в кожу и усиливает эффективность воздействия.

6. ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Помимо описанных методов, в приборе присутствует охлаждающий элемент, который способствует быстрому снижению температуры кожи, что усиливает лифтинговый эффект RF воздействия.

В результате охлаждения, ранее разогретые волокна коллагена быстро сжимаются и приобретают максимальную упругость, обеспечивая максимальный лифтинг-эффект сразу после процедуры. Также, охлаждение успокаивает кожу и помогает устранить возможные реакции кожи на воздействие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА m1610 GEZATONE

- Помолодевшее, подтянутое лицо
- Лифтинг, видимое омоложение кожи
- Выравнивание кожного микрорельефа
- Уменьшение глубины и количества морщин
- Повышение тонуса, эластичности и упругости кожи
- Моделирование овала лица, уменьшение «второго подбородка»
- Укрепление мышц лица и шеи
- Восстановление овала лица и формирование четких контуров
- Улучшение цвета лица и тона кожи
- Уменьшение и разглаживание носогубных, подбородочных складок, кисетных морщин вокруг рта
- Уменьшение последствий акне

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ :

- Беременность и лактация
- Острые инфекционные и вирусные заболевания
- Онкологические заболевания
- Наличие кардиостимулятора
- Заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка)
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения
- Акне в стадии обострения
- Наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия прибора
- Склонность к образованию келоидов
- Наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки
- Тяжелые формы сахарного диабета
- Тяжелые стадии гипертонической болезни
- Детский или подростковый возраст
- Прием дерматотропных препаратов (например, роаккутан)
- Грипп, ОРВИ, повышенная температура
- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.

ВНИМАНИЕ

Прибор не используется на поврежденной коже, не рекомендуется применение при прохождении омолаживающего курса в салоне с использованием травмирующих методик (микродермабразия, химический пилинг, лазерное омоложение и шлифовка, радиоволновой лифтинг).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией:

1. Процедуры на лице проводятся раз в день, воздействие на каждую часть не более 3 минут.

** Если вы чувствуете дискомфорт, завершите процедуру.

• Общая продолжительность процедуры не должна превышать 15 минут.

** Проводите процедуры только согласно инструкции.

** Во время процедуры прибор должен постоянно находиться в движении, не давайте ему задерживаться на одном участке дольше 3 секунд во избежание перегрева.

2. Перед процедурой снимите контактные линзы, все металлические украшения, удалите макияж.

3. Не использовать на сухой коже.

• При использовании на сухой коже возникает риск ожога и повреждения.

• Используйте для процедуры подходящие средства для лица.

4. Ощущения на коже могут различаться для каждой процедуры в зависимости от Вашего состояния.

• Кожа может быть более чувствительная в период критических дней.

Рекомендуется в такие дни использовать уровни с меньшей интенсивностью.

• Если во время процедуры вы ощущаете чрезмерное тепло, немедленно переключитесь на другую часть.

• При появлении сыпи, покраснения или зуда немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь со специалистом.

5. В некоторых случаях, после физических упражнений, в случае дискомфорта из-за усталости мышц, рекомендуется на один день пропустить процедуры, чтобы дать коже и телу отдых.

6. При вялости кожи, недомогании или аллергической реакции проконсультируйтесь со специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство

Наименование	Массажер для RF-лифтинга лица
Модель	m1610
Размер (Д*Ш*В)	170x48x20 мм
Вес	550 г
Рабочая температура окружающего воздуха	15–30°C при влажности 10–60%
Дисплей	3,3 см OLED

Зарядное устройство

Входное напряжение и потребляемый ток:	AC 100–240 V, 50 / 60 Hz, 0,35 A
Выходное напряжение / ток:	9,0В / 1,5А

Параметры сигналов

Выходная частота RF:	1 МГц
Выходная частота MET импульсов:	15–33 Гц
Частота пачек импульсов:	5Гц пауза 0,2 с
Амплитуда импульсов MET:	60В
Механическая вибрация:	3 кГц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат Gezatone m1610	1 шт.
Зарядное устройство с базой	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Излучатель

Металлическое магнитное кольцо

Дисплей

Кнопка интенсивности

Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ и изменения режима

Зарядная база

Инструкция по эксплуатации

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ



РЕЖИМЫ РАБОТЫ



RF-ОЧИЩЕНИЕ



RF-УВЛАЖНЕНИЕ



RF+EMS



RF+КРАСНЫЙ СВЕТ



ГОЛУБОЙ СВЕТ, РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Перед процедурой снимите контактные линзы, все металлические украшения. Удалите макияж и очистите кожу лица.
- На те части, на которых будет проводиться процедура, нанесите около 5 грамм средства для лица.
- Перед проведением процедуры зафиксируйте нетканую салфетку на излучателе с помощью магнитного кольца, если нужно.

1. Нажмите и удерживайте кнопку "Вкл.-Выкл./Переключения режима" в течение 3 секунд, чтобы включить прибор (по умолчанию включится режим RF очистки)



2. Нажмите кнопку "Вкл.-Выкл./переключения режима", чтобы переключить программу.



3. RF режим очищения, RF IMPORT, RF+EMS, RF + КРАСНЫЙ СВЕТ – каждый режим имеет 5 уровней интенсивности, с помощью кнопки изменения интенсивности ее можно варьировать. Режим COOL не имеет регулировки интенсивности.

4. Каждый режим работает в течение 3 минут, если прибор будет не использоваться более 1 минуты, устройство автоматически отключится.



5. Во включенном состоянии, если вы нажмете кнопку включения определенного режима – он зафиксируется. Если вы повторно нажмете кнопку – включится следующий режим.

6. Нажмите и удерживайте кнопку "Вкл.-Выкл./Переключения режима" чтобы выключить устройство.

При нажатии на кнопку "Вкл.-Выкл./Переключения режима" по кругу будет включаться RF режим очищения, RF импорт, RF EMS лифтинг, RF красный светодиод, синий светодиод – охлаждение.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АППАРАТА M1610 GEZATONE

РЕЖИМ 1 / CLEAN / ОЧИЩЕНИЕ (Рис. 1)

Режим объединяет RF, гальванические токи и вибрацию для максимального очищения кожи. Под воздействием гальванического тока происходит «омыление» комедонов и очищаются поры. Волны радиочастотного диапазона, используемые в данном режиме способствуют максимально глубокому очищению кожи. Под воздействием тепла, возникающего в тканях, ускоряется кровообращение, что способствует интенсивной детоксикации тканей. Действие гальваники и волн RF усиливается вибрацией.

! В данном режиме рекомендуется использовать нетканую салфетку, пропитанную очищающим раствором или лосьоном-дезинкрустантом.

Время работы в данном режиме не более 3х минут, частота применения 2 раза в неделю. Мощность RF – уровни 1 или 2.

РЕЖИМ 2 / IMPORT / УВЛАЖНЕНИЕ (Рис. 1)

В данном режиме сочетаются RF, гальванические токи и вибрация. Гальванические токи обеспечивают глубокое проникновение косметических средств, действие которых усиливает тепловой эффект, создаваемый волнами радиочастотного диапазона. За счет вибрации достигается максимально глубокое проникновение косметических средств.

! В данном режиме рекомендуется использовать нетканую салфетку, пропитанную увлажняющим лосьоном или сывороткой.

Время работы в данном режиме не более 3х минут, частота применения 2 раза в неделю. Мощность RF – уровни 1 или 2.

РЕЖИМ 3 / EMS / МИОСТИМУЛЯЦИЯ (Рис. 2)

В данном режиме сочетаются методы EMS и RF.

Миостимуляция тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи и разглаживает морщины, лицо приобретает четкие контуры. При тренировке мышцам необходима дополнительная энергия, источником которой является жировая ткань, поэтому ЭМС великолепно уменьшает объемы избыточного жира в области щек и «второго» подбородка.

Действие миостимуляции усиливает RF методика, что обеспечивает двойной эффект воздействия на проблему второго подбородка и избыточные жировые отложения.

! В данном режиме необходимо использовать Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции.

Время работы в данном режиме 3 минуты, частота применения 2 – 3 раза в неделю.

РЕЖИМ 4 / LED / ХРОМОТЕРАПИЯ (Рис. 1)

Сочетание красного света и методики RF. Волны красного света ускоряют процессы синтеза коллагена и стимулируют рост новых сосудов, что, в сочетании с RF лифтингом, повышает плотность кожи, подтягивает и способствует сокращению морщин.

! В данном режиме необходимо использовать Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции.

Время работы в данном режиме 3 минуты, частота применения 2 – 3 раза в неделю.

РЕЖИМ 5 / COOL / ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (Рис. 2)

Сочетание синего света и охлаждающего элемента способствует быстрому снижению температуры кожи, что усиливает лифтинговый эффект RF воздействия. В результате охлаждения, ранее разогретые волокна коллагена быстро сжимаются и приобретают максимальную упругость, обеспечивая максимальный лифтинг-эффект сразу после процедуры. Помимо лифтингового эффекта, режим COOL оказывает выраженное успокаивающее, противовоспалительное и регенерирующее действие на кожу, снижает болевую и тактильную чувствительность, минимизирует реакцию кожи на воздействие радиоволнами и создает на коже ощущение прохлады. Синий свет обладает антибактериальной активностью, что помогает бороться с проблемой акне. Также, благодаря использованию синего света ускоряются процессы репарации микрповреждений кожи.

! В данном режиме косметические средства не используются.


Время работы в данном режиме 3 минуты, частота применения 2 – 3 раза в неделю.

Рекомендуется использовать после режимов 3 и 4.

Рис. 1



Рис. 2

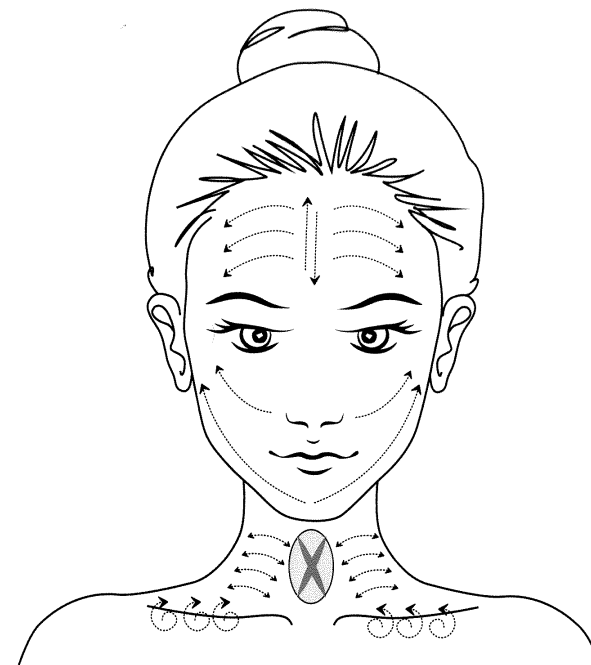

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ АППАРАТА. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Режим	Эффекты	Функция	Нетканая салфетка	Косметическое средство	Время	Мощность	Частота
RF очищение На дисплее: CLEAN ФУНКЦИЯ: RF 20 сек + вибрация 15 сек	Удаляет загрязнения из пор, кожа становится светлее и чище. Стимулирует детоксикацию.	RF + ионное очищение	Да	Очищающий лосьон Лосьон – дезинкрустант	Не более 3х минут	ТОЛЬКО УРОВЕНЬ 1,2	2 раза в неделю
RF увлажнение На дисплее: IMPORT, ФУНКЦИЯ: RF 20 сек + вибрация 15 сек	Косметические средства лучше проникают в глубокие слои кожи и более эффективны.	RF +ионное ударное введение косметики	Да	Увлажняющий / омолаживающий лосьон	Не более 3х минут	ТОЛЬКО УРОВЕНЬ 1,2	2 раза в неделю
RF + EMS На дисплее: EMS ФУНКЦИЯ: RF 20 сек + EMS 15 сек	Глубоко прогревает, стимулирует мышцы, активизирует синтез коллагена, подтягивает и укрепляет кожу.	RF + EMS	Да	Коллагеновая сыворотка или сыворотка с гиалуроновой кислотой	Около 3х минут	5 уровень	2 – 3 раза в неделю
			Нет	Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции.			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ АППАРАТА. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Режим	Эффекты	Функция	Нетканая салфетка	Косметическое средство	Время	Мощность	Частота
RF + динамич. красный светодиод На дисплее: LED, ФУНКЦИЯ: RF + красный светодиод	Глубоко прогревает, стимулирует синтез коллагена, укрепляет и подтягивает кожу, улучшает цвет лица.	RF + LED красный свет	Нет	Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции.	Около 3 минут	5 уровень	2 – 3 раза в неделю
Холодный голубой светодиод На дисплее: COOL, ФУНКЦИЯ: синий светодиод + охлаждение	Охлаждает кожу, контролирует воспаления, успокаивает, стимулирует регенерацию, снижает реакцию кожи на воздействие.	LED синий свет + холод	Нет	-	Около 3 минут	Нет	2 – 3 раза в неделю

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

1. Скользите по коже, не фиксируясь на одном месте – это может спровоцировать ожог.
2. В режиме RF температура зависит от состояния кожи.
3. Не используйте в области вокруг глаз (за исключением холодного режима).
4. В режиме RF+красный светодиод не смотрите напрямую на светодиод. Рекомендуется использовать при комнатной температуре 15–30 градусов по Цельсию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ОЖОГА

- Если при использовании вы чувствуете чрезмерное тепло, немедленно прекратите использование.
- Не используйте на сухой коже.
- Используйте только со специальными средствами для кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Батарея, используемая в этом устройстве – профессиональная аккумуляторная батарея, не подходит для использования на других устройствах.

- Не заряжать батарею отдельно от устройства.
- Не класть в огонь и не вызывать перегрев батареи.
- Не протыкать, не ударять, не разбирать.
- Не хранить рядом с украшениями, заколками для волос и т.д.
- **Не заряжать и не использовать в условиях высоких температур, например, вблизи печей или под яркими солнечными лучами. Это может привести к перегреву, пожару или взрыву.**

При необходимости технического обслуживания (например, замены батареи), пожалуйста, обратитесь к дилеру, где был приобретен продукт или в уполномоченный сервисный центр.

Литий-ионный аккумулятор, используемый в этом продукте является ценным ресурсом, который может быть переработан.

Перед утилизацией прибора, пожалуйста, удалите литий-ионный аккумулятор из устройства и передайте его производителям, специализирующимся на переработке аккумуляторных батарей для дальнейшей обработки.

Батарея, используемая в приборе	
Название	Литий-ионная перезаряжаемая батарея
Номинальное напряжение	7,4 В
Номинальная мощность	500 мА/ч
Время зарядки	2,5 ч

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина
Прибор не включается	Прибор не заряжен.
	Кнопка включения была нажата недостаточно сильно, удерживайте ее дольше.
Отсутствует воздействие	Кожа слишком сухая.
	Используйте специальные средства для кожи.
	Уровень микротоков слишком низкий.
Отсутствует прогрев	Насадка прибора недостаточно плотно соприкасается с кожей.
	Насадка прибора недостаточно плотно соприкасается с кожей.
Слишком горячо	Не используйте прибор на одной части лица или тела дольше 3 минут.
	Кожа слишком сухая.
После зарядки устройство отключается через пару минут.	Недостаточно заряда.
	Полностью зарядите прибор.
	Возможно, истек срок годности батареи (примерно 3 года)