

# Массажер для тела Gezatone Bio Sonic 1140

Руководство пользователя





## Характеристики

Тип прибора: беспроводной, заряжаемый

Частота в режиме кавитации: 800 кГц±10%

Длина волны в режиме светотерапии: красный 622±5 нм, синий 467±5 нм

Частота в режиме RF: 500 кГц±10%

Частота в режиме ems: 2,5 , 10, 33 Гц

Входное напряжение: 100-240 в/50-60 Гц

Выходное напряжение (зарядной базы): 5 В

Емкость аккумулятора: 900 мАч

Время заряда: около 3 часов

Время работы: около 1,5 часов

Габариты: 99 x 99 x 94 мм

Вес: 295 г

Габариты упаковки: ~120 x 120 x 110 мм

Вес в упаковке: ~500 г

Страна-разработчик: Франция

## Порядок проведения процедуры

Ознакомиться с информацией по выполнению массажа прибором Gezatone Bio Sonic 1140 можно, изучив инструкцию, которая находится в упаковке с прибором. Важно обратить особое внимание на некоторые нюансы:

- Время одной процедуры должно быть не более 30 минут. На каждый участок можно отводить только 10 минут. За один сеанс можно обработать 3 участка.
- Следует ориентироваться на автоматическое срабатывание прибора. Он выключается самостоятельно через каждые 10 минут.
- Допустимый размер обрабатываемой зоны может быть не более 20 x 30 см.
- В процессе массажа пользователь будет ощущать тепло. Возникшее покраснение кожи исчезнет через 1 час после окончания процедуры.
- Прибором нельзя воздействовать на область лица, шеи и зоны декольте.


## Противопоказания

Применение массажера не рекомендуется:

- при беременности;
- в период лактации;
- при наличии онкозаболеваний, сахарного диабета, болезней почек, гепатита;
- при обнаружении заболеваний сердца, сосудов;
- при гипертонии;
- в случае диагностированных хронических дерматитов;
- при эпилепсии;
- в зоне имплантатов (например, филеров, силикона);
- при наличии ран на участках обработки;
- в случае наличия келоидов и склонности к их образованию;
- при употреблении дермотропных средств.

Также не рекомендуют воздействовать на кожу описываемым выше массажером в случаях снижения иммунитета при ОРВИ, ОРЗ, гриппе.

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

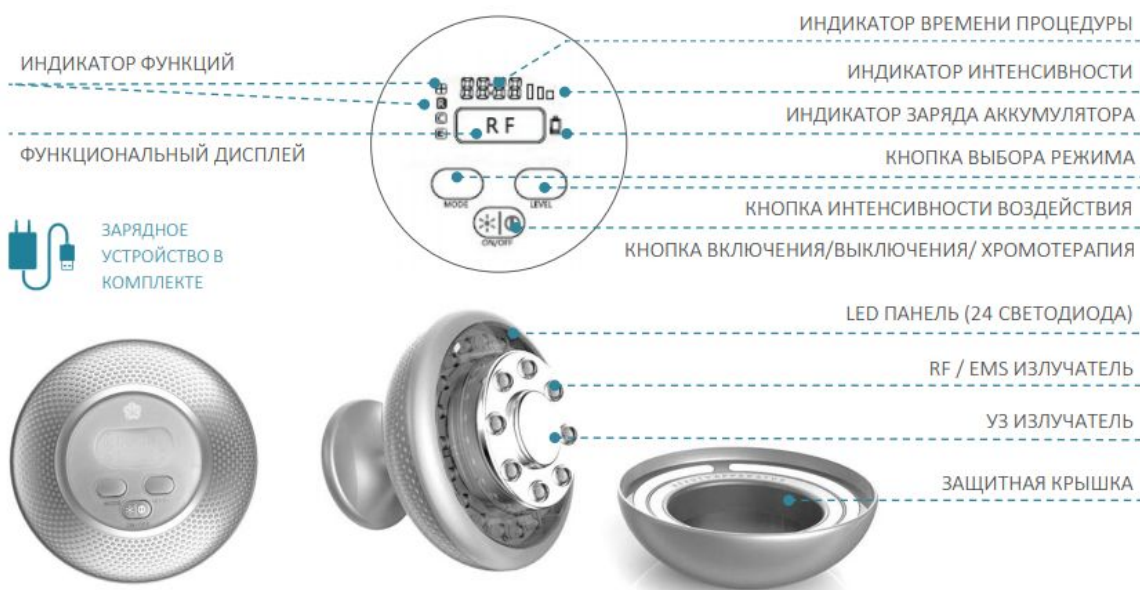

## 5 РЕЖИМОВ / ФУНКЦИЙ

КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.



RF

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ РАДИОВОЛНАМИ. 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



CAVI

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ. 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



RF+CAVI+EMS (COMBI)

RF, КАВИТАЦИЯ И EMS ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД. 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



EMS

РЕЖИМ МОНОВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫШЦЫ, КОЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ. 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



RED / BLUE

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ КРАСНЫМ ИЛИ СИНИМ ЦВЕТОМ. РЕЖИМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ СИНХРОННО С ДРУГИМИ РЕЖИМАМИ.



## Комплектация

- Антицеллюлитный массажер для тела Bio Sonic
- Зарядное устройство
- Документация