



# Микротоковый массажер Olzori D-Lift

Краткое руководство пользователя





## 1. Тип товара: многофункциональный косметический прибор

## 2. Характеристики

- Поддерживаемые функции: RF-лифтинг, вибромассаж, прогревание
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Время автономной работы: до 10 часов
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Размеры прибора: 99 x 88 x 23 мм
- Вес: 74 г
- Размеры упаковки: ~145 x 120 x 38 мм
- Вес в упаковке: ~220 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Противопоказания

Прибор не рекомендуется к применению в следующих случаях:

- при аллергических реакциях кожи;
- при солнечных ожогах;
- при нарушении целостности кожных покровов;
- после недавно перенесенных пластических операций;
- после процедур химического пилинга или микродермабразии;
- во время приема медицинских препаратов, повышающих чувствительность кожи;
- при индивидуальной непереносимости микротоков;
- при тромбозах;
- при наличии психических расстройств;
- при инфекционных и кожных заболеваниях;
- при наличии металлических или подкожных имплантатов в предполагаемой зоне воздействия прибора;
- при онкологических заболеваниях;
- при наличии кардиостимулятора, а также патологии сердечной деятельности;
- во время беременности.

### ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание, что микротоковая терапия и другие прогревающие и расширяющие сосуды процедуры противопоказаны после инъекций ботокса. Во избежание нежелательных эффектов перед использованием аппарата необходима консультация специалиста.


В случае возникновения любого дискомфорта, пожалуйста, прекратите использование аппарата и обратитесь к врачу.

#### 4. Порядок использования

Протрите массажер салфеткой, входящей в комплект, включите устройство и выберите один из двух предлагаемых режимов работы.



Приложите массажер к коже в одной из следующих зон:

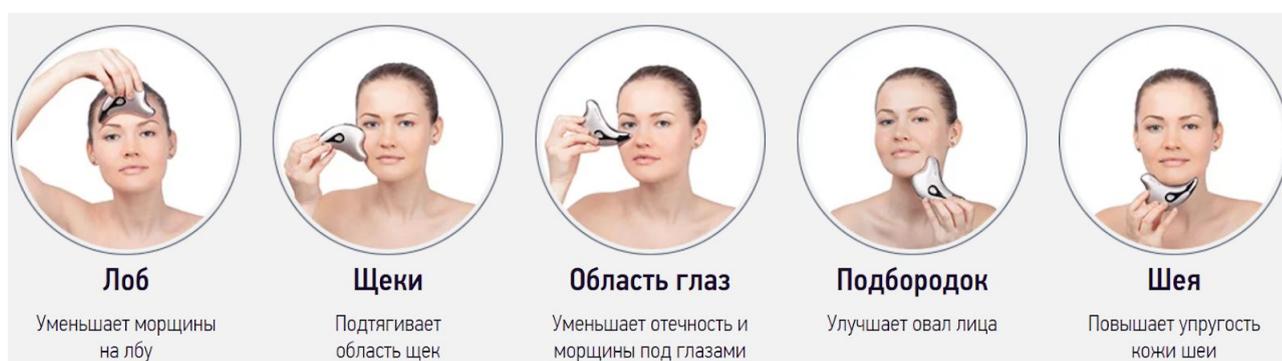

Массируйте выбранную область с минимальным нажимом в течение 1-2 минут.

Получить более подробные рекомендации по использованию устройства вы можете, обратившись к инструкции, входящей в комплект поставки.



## 5. Вопросы и ответы

### **Как часто можно пользоваться массажером и как долго следует проводить процедуру массажа?**

Рекомендуется использовать устройство ежедневно утром и вечером после умывания. Каждая процедура занимает от 5 до 10 минут.

### **Как быстро я увижу результат от применения массажера?**

Максимально желаемый результат вы сможете достигнуть примерно через 60 дней непрерывного использования. Очень важным является регулярное применение прибора.

### **Можно ли применять кремы и гели при использовании массажера?**

Да, процедура массажа должна быть совмещена с использованием косметических средств, которые подходят именно вам (гели, кремы, масла, сыворотки, эссенции) и обеспечивают лучшее скольжение массажера по коже. Также рекомендуется применять массажер сразу после увлажняющих масок, например тканевых, насыщенных витаминами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой и коллагеном. Микротоковый массажер Olzori\_D-Lift усиливает и обеспечивает более глубокое проникновение питательных компонентов уходовой косметики в кожу.

### **С какими средствами нельзя использовать массажер?**

Во избежание повреждения массажера не рекомендуется его использовать совместно со скрабами, с косметикой на основе глины и со средствами, имеющими зернистую текстуру.

### **Есть ли возрастные ограничения?**

Аппарат не имеет возрастных ограничений. Запрещено самостоятельное использование массажера детьми. Также мы рекомендуем хранить прибор в недоступном для детей месте.

### **Можно ли использовать массажер после уколов красоты (ботокс, филлеры)?**

Наличие ботокса и филлеров не является противопоказанием к использованию массажера. При этом рекомендуется использовать массажер не раньше чем



через 2-3 недели после проведения процедуры.

### Как заряжается массажер?

Массажер оснащен аккумуляторной батареей. Зарядка аккумулятора производится от бытовой электрической сети через USB-кабель (поставляется в комплекте). Полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать массажер до 10 часов работы в режиме без нагрева рабочей поверхности (режим индикатора синего цвета) и 30 минут в режиме с нагревом (индикатор красного цвета). Зарядите заново массажер, если устройство не использовалось длительное время. При этом прибору может потребоваться до 15 минут для реактивации аккумуляторной батареи и перехода в режим зарядки.

### Можно ли использовать массажер в душе или в ванне?

Массажер **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** водонепроницаемым. Запрещено мыть устройство под струей воды. Необходимо исключить контактирование прибора с водой.

### Требуется ли особый уход за массажером?

После применения массажера протрите его сухой безворсовой салфеткой, которая входит в комплект поставки. Обязательно удалите с устройства остатки средств по уходу за кожей после процедуры массажа. В противном случае массажер может быть поврежден, если им не пользовались длительное время. Храните массажер в тканевом чехле в недоступном для детей месте.

## 6. Комплектация

- Микротоковый массажер Olzori D-Lift
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Чехол для хранения
- Документация

## 7. Страна-производитель: КНР