



# Портативный ирригатор Xiaomi Soocas W3

Руководство пользователя





1. Тип товара: портативный ирригатор

2. Характеристики

- Максимальное давление жидкости: 140 кПа
- Частота пульсации: 1300 Гц
- Объем резервуара для воды: 230 мл
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 2200 мАч
- Количество режимов работы: 3
- Материалы корпуса: тритан, АБС-пластик
- Размеры устройства: 200 x 72 x 41 мм
- Вес: 290 г
- Размеры упаковки: ~240 x 105 x 80 мм
- Вес в упаковке: ~450 г



### 3. Меры предосторожности

Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со стоматологом.

Противопоказания:

- гингивит,
- пародонтит,
- стоматит,
- пульпит,
- травматические поражения десен,
- наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних стадий,
- истончение эмали.

Используйте ирригатор исключительно для очистки ротовой полости. Струя воды, направленная в глаза, нос, уши или горло, может нанести серьезную травму. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжелых формах пародонтита перед применением прибора обратитесь к стоматологу.

Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.

Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора. Не заливайте в резервуар никаких жидкостей, кроме питьевой воды.

После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости для воды и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем способны развиваться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором.

Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых.  
Минимальный возраст для использования устройства составляет 7 лет.


iG-store не несет ответственности за возможные последствия использования прибора, вызванные неправильной эксплуатацией и несоблюдением правил техники безопасности.

#### 4. Зарядка аккумулятора

Присоедините устройство к разъему USB с силой тока не менее 1 А, используя шнур, входящий в комплект поставки. Разъем для подключения шнура расположен на задней стороне корпуса ирригатора под белой резиновой крышкой.

Время полной зарядки составляет 4-6 часов. Наблюдать за ходом зарядки вы можете с помощью светодиодного индикатора, расположенного возле клавиши питания.

#### 5. Управление работой ирригатора

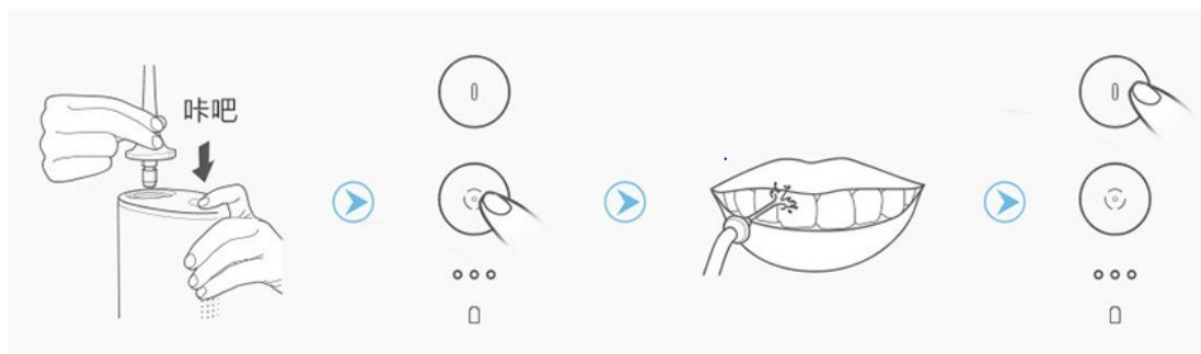

Перед началом использования установите насадку. Откройте крышку, расположенную на стенке резервуара и, наклонив устройство, наполните его чистой питьевой водой чистой водой и закройте его крышку. Затем включите устройство нажатием кнопки (иллюстрация 2) и выберите нужный режим последовательными нажатиями (сильный/слабый/пульсация). После использования выключите устройство нажатием другой кнопки.

Для того, чтобы снять насадку, зажмите кнопку расположенную возле нее - на верхней грани корпуса прибора.



## 6. Использование ирригатора


### Общие рекомендации по использованию устройства

- Почистите зубы перед использованием ирригатора.
- Наклонитесь над раковиной – при использовании ирригатора вода должна свободно вытекать из ротовой полости.
- Начните с минимального давления и постепенно увеличивайте его.
- Используйте менее мощный режим для гидромассажа десен и более мощный для удаления зубного налета.
- Продвигайтесь от передних зубов к коренным. Сначала очищайте переднюю и заднюю плоскости зуба, затем межзубный промежуток и область контакта зуба и десны.
- Удерживайте ирригатор так, чтобы водяная струя встречалась с очищаемой поверхностью под прямым углом.
- После использования устройства тщательно прополоскайте рот, чтобы удалить загрязнения.

После использования ирригатора выключите устройство, снимите резервуар с водой и слейте остатки в раковину. Установите резервуар на место и оставьте крышку открытой до полного высыхания.

Перед началом использования мы рекомендуем ознакомиться с любой из популярных видеопрограмм на **YouTube**. Их можно найти по запросу «Как пользоваться ирригатором».

## 7. Назначение различных насадок

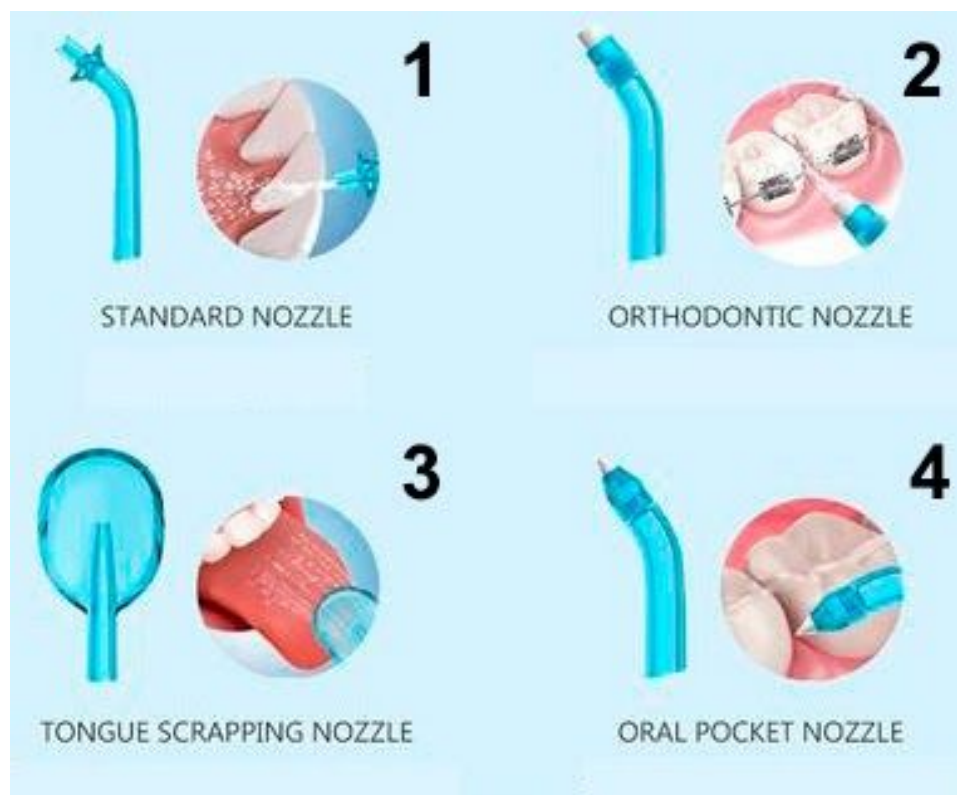

В комплект входят:

- 1 – универсальная насадка;
- 2 – насадка для чистки брекетов, коронок, мостов и имплантов;
- 3 – насадка для чистки щек и языка;
- 4 – насадка для удаления налета из десневых карманов.

## 8. Комплектация

- Ирригатор Xiaomi Soocas W3
- Кабель USB для подзарядки аккумулятора
- Документация

9. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР