



Косметический массажер Olzori L-Mirru

Руководство пользователя





1. Тип товара: косметический массажер

2. Характеристики

- Материал: нержавеющая сталь, пластик
- Режимы световой терапии: красный, желтый, синий, фиолетовый, фиолетовый с мерцанием
- Емкость аккумулятора: 1050 мАч
- Время непрерывной работы: 80 минут
- Время зарядки: 5 часов
- Количество массажных головок: 4
- Количество скоростей: 3
- Мощность: 2 Вт
- Напряжение питания: 5 В, 0,3-0,4 А
- Номинальная мощность: 8 Вт
- Частота RF-колебаний: 1 МГц
- Вес: 235 г
- Размер: 93 x 93 x 123 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Размер в упаковке: 170 x 115 x 115 мм
- Страна-разработчик: Франция
- Страна-производитель: КНР



3. Меры предосторожности


Внимание! Массажер предназначен исключительно для лица (кроме зоны глаз), шеи и зоны декольте. Возможны индивидуальные противопоказания, рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед использованием.

Режим RF-лифтинга и EMS-стимуляции необходимо использовать не более трех раз в неделю. LED-терапия может проводиться не более одного сеанса в день.

Перед использованием устройства необходимо удалить с лица всю косметику. Для эффективного применения режимов RF-лифтинга и EMS-стимуляции требуется специальный токопроводящий крем. По окончании сеанса гаджет необходимо очистить влажной салфеткой, а на кожу нанести увлажняющий крем.

4. Зарядка

Для зарядки гаджета установите массажер внутрь подставки и подключите его к источнику питания. О состоянии батареи можно сделать вывод по цвету индикатора в виде буквы «М». Красный цвет означает, что зарядка идет в данный момент. Зеленый цвет говорит о том, что процесс зарядки окончен. Батареи устройства при зарядке в течение 5 часов хватает на 80 минут непрерывной работы.

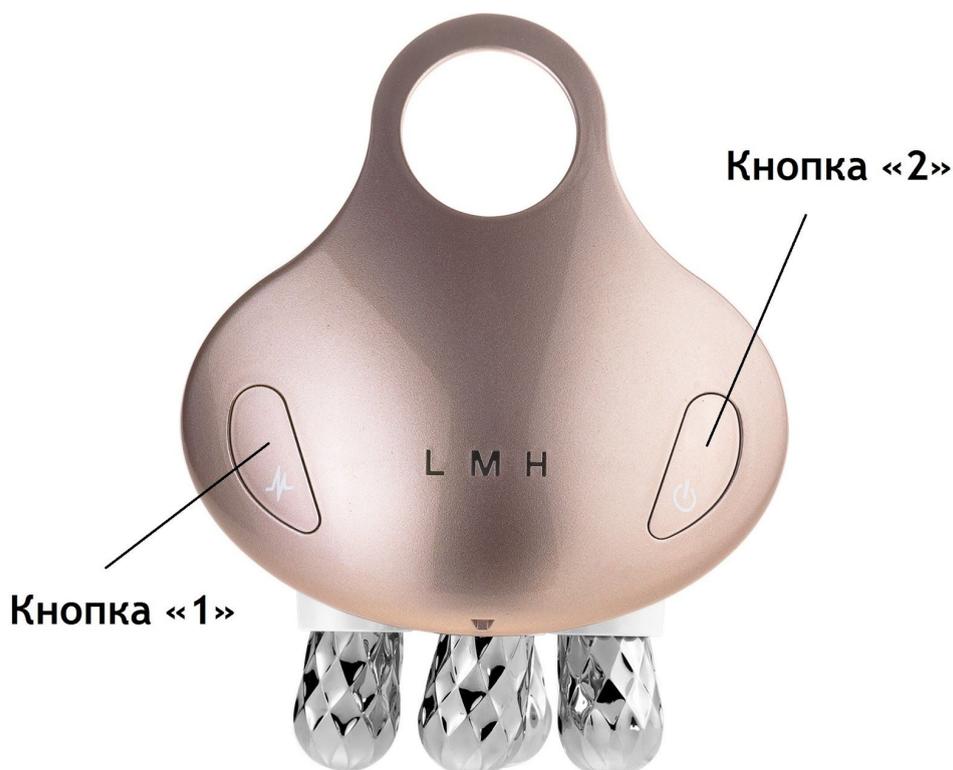

5. Включение и выключение устройства

Для запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку «2» около 2 секунд.
Для выключения массажера повторите операцию.

6. Выбор режима работы

Для увеличения интенсивности работы нажмите на кнопку «1». Подсвеченная на корпусе буква продемонстрирует выбранный уровень интенсивности L (слабый), M (средний), H (высокий).

При повторном нажатии на кнопку «1» после включения уровня интенсивности H массажер переключится в режим EMS-стимуляции. В подтверждение этого цвет индикаторов изменится с синего на красный. Используя режим миостимуляции, вы также сможете переключаться между тремя уровнями его интенсивности.



Нажатие на кнопку «2» внутри каждого из режимов активирует переключение цветов LED-терапии. Цвета будут переключаться в следующем порядке: красный, желтый, синий, фиолетовый, фиолетовый с мерцанием. Сеанс работы каждого из выбранных режимов составляет 10 минут.

7. Комплектация

- Массажер L-Mirru
- Зарядка-подставка
- Кабель Type-C
- Чехол для хранения
- Документация