




Косметический массажер Gezatone Biolift Plasma

Руководство пользователя



GÉZATONE

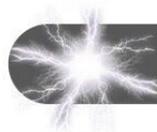

BIOLIFT PLASMA

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША В СОЧЕТАНИИ С МИКРОТОКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ BIOLIFT PLASMA ПОМОГУТ ПОДТЯНУТЬ КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС КОЖИ, СОКРАТИТЬ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЮ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ,
ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ
КОЖИ, МОРЩИНЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО
САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,
ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ АКНЕ,
ПОСТАКНЕ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ,
«УСТАВШАЯ» КОЖА.
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



ОТЕЧНОСТЬ
СТРЕССОВАЯ КОЖА

GEZATONE

BIOLIFT PLASMA

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТСЯ С МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИЕЙ.



Арт. 1301268



**МИКРОТОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ**

- ОМОЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ТОНИЗАЦИЯ И ПОДТЯЖКА КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАГИ В КОЖЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ



**ХОЛОДНЫЙ
ПЛАЗМЕННЫЙ ДУШ**

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО И ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ОБУСЛОВЛЕН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СЛАБЫМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.

- ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КОЖИ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК.
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
- УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ.


GÉZATONE




ПЛАЗМА

ПЛАЗМА – ЧЕТВЕРТОЕ АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА, ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. В СОСТОЯНИИ ПЛАЗМЫ РАЗРЫВАЮТСЯ АТОМНЫЕ СВЯЗИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ С ЭЛЕКТРОНАМИ ОБРАЗУЮТ ГАЗООБРАЗНУЮ СМЕСЬ.


ТВЕРДОЕ ТЕЛО

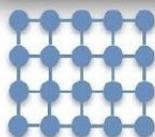

ЖИДКОСТЬ

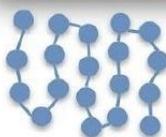

ГАЗ

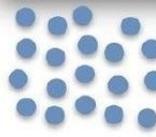

ПЛАЗМА



ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА – ИОНИЗИРОВАННЫЙ ГАЗ, ОБЛАДАЮЩИЙ СВОЙСТВОМ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ (ХОЛОДНАЯ) ПЛАЗМА ОБЛАДАЕТ НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИОНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ИОНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ДОСТИГАЕТ 1%.

МЕДИЦИНЕ И КОСМЕТОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ**, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 35-40 ГРАДУСОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.



ПАТОГЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ

- РАЗРУШЕНИЕ МЕМБРАНЫ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК
- ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
- БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ



ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ


- ВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ
- АКТИВИЗАЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И АКТИВНОСТИ

GÉZATONE



ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В КОРПУСЕ АППАРАТА ПРОИСХОДИТ ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА И ОБРАЗУЕТСЯ ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА.

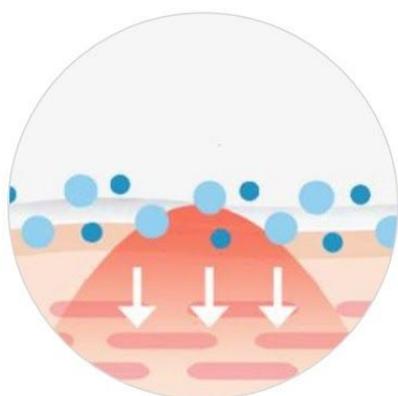

ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ БЫСТРО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРОЕ ОЩУЩАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ.

ХОЛОДНАЯ ПЛАЗМА ПОВЫШАЕТ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ, ПО КОТОРЫМ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОНИКАЮТ В КОЖУ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПЛАЗМАПОРАЦИЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ
И ОБНОВЛЕНИЯ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛОТДЕЛЕНИЯ,
УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА



БАКТЕРИЦИДНОЕ Д-Е,
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ

GÉZATONE

BIOLIFT PLASMA

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ



УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И ДНК.
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.

ПОМИМО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ, МИКРОТОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ. СОКРАЩАЕТ
ОТЕЧНОСТЬ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ УРОВЕНЬ ВЛАГИ.
ПОВЫШАЕТ ТОНУС, ПЛОТНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ,
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА, СПОСОБСТВУЕТ
УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ,
УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДТЯЖКА КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ



АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ,
СОКРАЩЕНИЕ ПОР



КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ТОНИЗАЦИЯ И
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ



ДРЕНАЖ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

GÉZATONE

BIOLIFT PLASMA

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1301268

- КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА
- СОЧЕТАЕТ 2 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДУША И МИКРОТОКОВ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
- ПРОЦЕДУРА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА, БЕЗБОЛЕЗНЕННА И КОМФОРТНА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ: ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- ОСНАЩЕН СМАРТ-ТАЙМЕРОМ, ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- АППАРАТ ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОЕЗДКИ.

1

1 РЕЖИМ РАБОТЫ



БОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОДА

2

2 ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА

GÉZATONE



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СМАРТ –
ТАЙМЕР
10 МИНУТ



Арт. 1301268

- **КОМФОРТ И УДОБСТВО:** ВСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НА БОЛЕЕ 20 – 30 МИНУТ В ДЕНЬ.
- ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ, ЧТО УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
- ЭНЕРГИЯ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ.
- НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, ОТСУТСТВУЕТ РЕАКЦИЯ ТЕПЛООВОГО ШОКА **НЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА.**
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС: **УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.**



КОМФОРТНАЯ
ПРОЦЕДУРА



ПОВЫШЕНИЕ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
КОСМЕТИКИ



НЕТ ТРАВМЫ
И НЕТ БОЛИ



НЕТ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ
КОЖИ



АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО




УДОБНО ДЕРЖАТЬ
В РУКЕ

GÉZATONE




BIOLIFT PLASMA

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

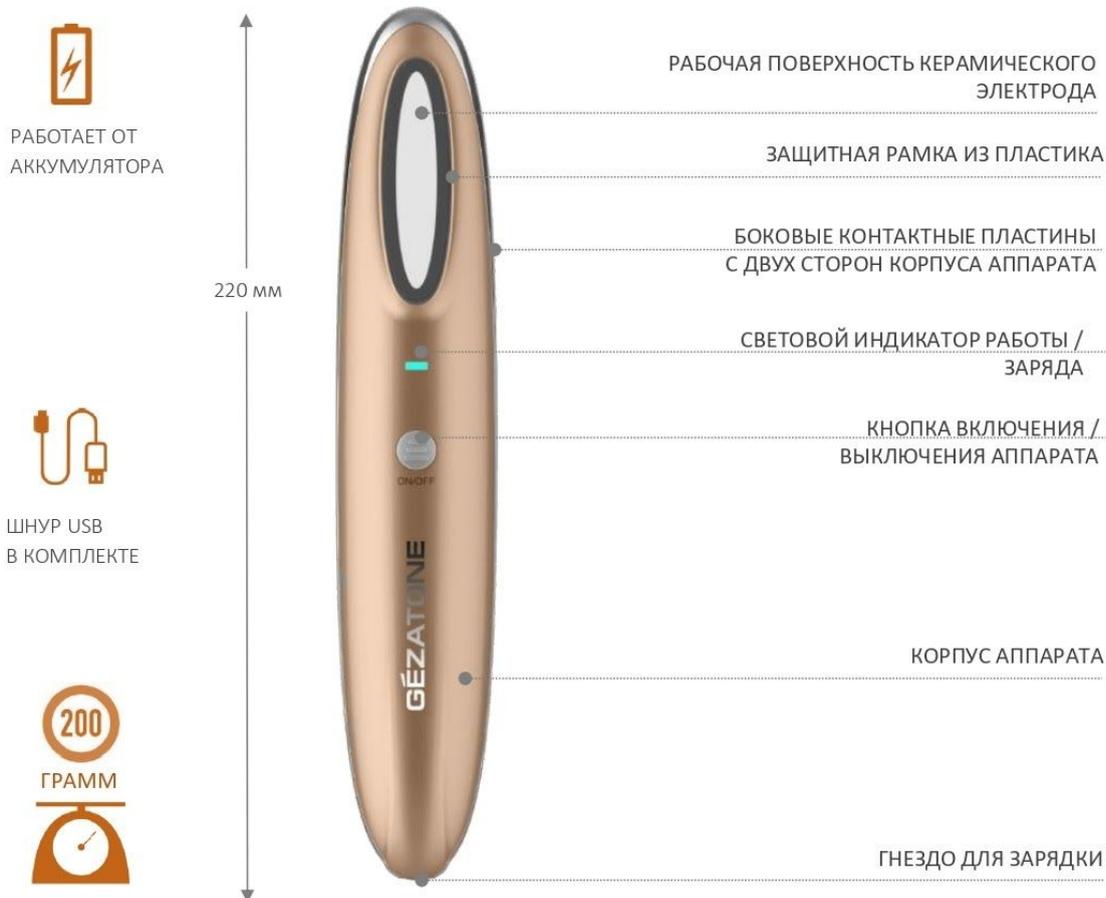

Арт. 1301268

GEZATONE

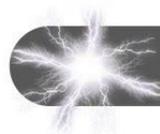

BIOLIFT PLASMA

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ GEZATONE BIOLIFT PLASMA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОСМЕТИКА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ И ПОПАДАЮТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА.

СЫВОРОТКА
С КОЛЛАГЕНОМ 5%



4506006 – 50 мл

СЫВОРОТКА
«ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА» 2%



4506004 – 50 мл

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «SEBO BALANCE»



4506012KPRO – 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ С ПЕПТИДАМИ
«SUPERLIFT PEPTIDE»



4506014KPRO – 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
24 ЧАСА «HYDRO BALANCE»



4506010KPRO - 3 мл x 5

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
"ANTI COUPEROSE"



4506011KPRO – 3 мл x 5

GÉZATONE



BIOLIFT PLASMA

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА
С БЕТА-ГЛЮКАНОМ "SEA ICE
SPRING"



4515939K

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ
МАСКА С ЭФФЕКТОМ
"ВТОРАЯ КОЖА"



4516425K

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА С
УРСОВОЙ КИСЛОТОЙ
И МАТРИКСИЛОМ
"MATRYX S6"



4515938K

МАСКИ СЕРИЯ
"PLANT FERMENT NUTRITION"



4501330K
4501331K
4501332K

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ПРОТИВ КУПЕРОЗА С
ПАНТЕНОЛОМ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4516404K


МАСКИ
СЕРИЯ "PREBIOSKIN"



4515941K
4515942K
4515940K


ТАКЖЕ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШЕЛКОВЫЕ
И БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.

GÉZATONE

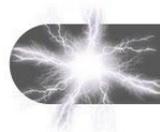

BIOLIFT PLASMA

РЕЗУЛЬТАТЫ*

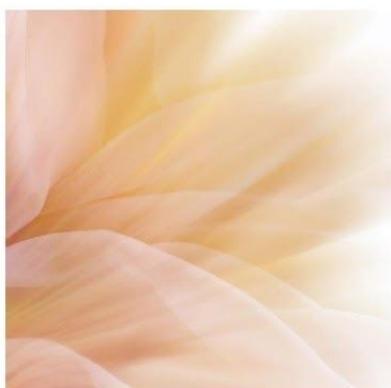

- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КУРС ИЗ 15-20 ПРОЦЕДУР.
- ПЕРВЫЕ 10 СЕАНСОВ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, ДАЛЕЕ СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ 1 ДЕНЬ.
- КУРСЫ МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ЧЕРЕЗ 4-6 МЕСЯЦЕВ, В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КУРСАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ.



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
И СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



ПОВЫШЕНИЕ
ПЛОТНОСТИ И
УПРУГОСТИ КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



МОРЩИНЫ МЕНЕЕ
ВЫРАЖЕНЫ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ



СНИЖЕНИЕ
РЕАКТИВНОСТИ
КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЙ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса и регулярного использования аппарата.*

GÉZATONE


BIOLIFT PLASMA

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: СВЕЖИЕ ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.

GÉZATONE

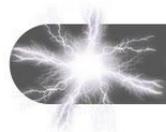

BIOLIFT PLASMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301268

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
(в комплект не входит): = 5В, 1.5А
ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА: Li-Ion
3,7В 1000 мА*ч
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
+5...+35°С ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ВОЗДУХА: 20...80%
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: 138 X 260 X 52

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР GEZATONE, BIOLIFT PLASMA -
1 шт.
ШНУР ЗАРЯДКИ - 1 шт.
Руководство по эксплуатации