



# Зубная щетка Impulse Dent

Руководство пользователя





## Поздравляем Вас с приобретением ультразвуковой зубной щетки **Impulse Dent!**

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом использования. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: предоставления печати продавца и даты продажи.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ультразвуковая зубная щетка — современный способ ежедневной чистки зубов. Исследования доказывают, что она во много раз эффективнее обычной или электрической щетки. При этом ультразвук позволяет избежать негативного абразивного воздействия на эмаль зубов. Уникальность технологии заключается в том, что ультразвук обезвреживает бактерии, расщепляя их, а звуковые колебания «выметают» налет, не оказывая воздействия на эмаль.



## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройством могут пользоваться дети и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными, или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях.
- Устройством могут пользоваться дети под наблюдением взрослых.
- Зарядная станция всегда должны быть отключена от электросети при длительных перерывах в использовании и перед чисткой устройства.
- Не используйте устройство, если шнур питания, сетевая вилка, изоляция шнура либо другие части имеют видимые повреждения.
- В случае обнаружения повреждений устройства необходимо обратиться в сервисную службу.

### **Опасность повреждения электрическим током**

- Уберегайте зарядную станцию, шнур питания и вилку от контакта с водой.
- Используйте зарядную станцию только в помещениях.
- При контакте зарядной станции с водой немедленно отключите прибор от сети.


### **Пожарная безопасность**

- Не используйте устройство вблизи легко-воспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не накрывайте зарядную станцию во время зарядки устройства.

### **Обращение с аккумулятором**

- Кислота, содержащаяся в аккумуляторной батарее, опасна! Не допускайте контакта с кожей или слизистыми оболочками. Если это произошло, промойте поврежденный участок проточной водой и незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.
- Недопустимо разбирать аккумулятор, бросать в огонь или жидкость.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

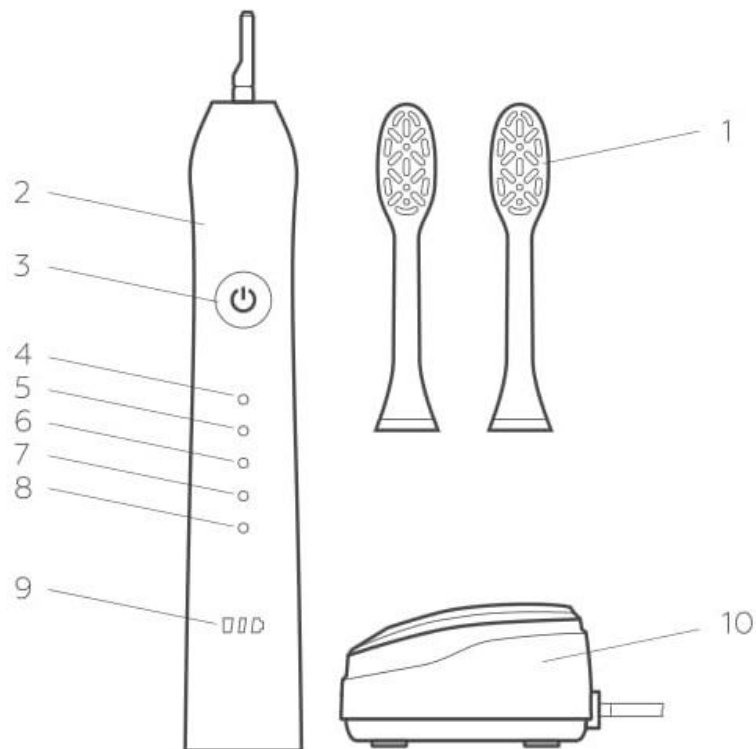

- 1 – насадки щетки
- 2 – рукоятка щетки
- 3 – кнопка Вкл/Выкл и переключения режимов
- 4 – индикатор режима Чистка / Clean
- 5 – индикатор режима Отбеливание / White
- 6 – индикатор режима Полировка / Polish
- 7 – индикатор режима Массаж / Massage
- 8 – индикатор режима Деликатная / Sensitive
- 9 – индикатор заряда батареи
- 10 – зарядная станция

Дополнительно можно приобрести:  
Насадки для электрической звуковой зубной щетки Impulse Dent (в комплекте 2 насадки).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

1. Подключите зарядную станцию к электросети.
2. Установите щетку на зарядную станцию.



- Рукоятка щетки Impulse Dent является водонепроницаемой, она электрически безопасна и разработана для использования в ванной комнате. Но не погружайте щетку в воду на длительное время.
- Полная зарядка занимает 24 часа. Синий немигающий сигнал индикатора информирует о том, что щетка заряжается. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.

**ВАЖНО! Индуктивный принцип зарядной станции требует отсутствия любых металлических предметов в радиусе минимум 10 см.**

## РЕЖИМЫ ЧИСТКИ

Impulse Dent предлагает пять эффективных режимов чистки для полноценного ухода за полостью рта. Щетка имеет функции автоматического оповещения, если чистка длится более 30 секунд в одной области и автоматического отключения после 2 минут чистки.

**Чистка (Clean)** – до 31 000 колебаний в минуту.

**Отбеливание (White)** – до 41 000 колебаний в минуту, удаляет микроскопические частицы и бактерии.

**Полировка (Polish)** – до 48 000 колебаний в минуту, удаляет в 2 раза больше налета и полирует поверхность зубов.

**Массаж (Massage)** – до 31 000 колебаний в минуту, делает деликатный массаж десен путем чередования амплитуды колебаний от слабой к сильной и наоборот.

**Деликатная (Sensitive)** – до 30 000 колебаний в минуту, осуществляет бережную чистку в чувствительной области.

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ

Включение щетки происходит путем нажатия кнопки Вкл/Выкл. Каждое последующее нажатие кнопки обеспечит переключение режима работы щетки – Чистка, Отбеливание, Полировка, Массаж и Деликатная.

После 2 минут чистки щетка выключится автоматически. Для самостоятельного выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 5 секунд.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗУБОВ

Перед началом использования плотно установите насадку на рукоятку щетки.

1. Смочите щетинки на насадке щетки.
2. Нанесите небольшое количество зубной пасты.
3. Поместите щетку под углом примерно 45 градусов к линии десен.
4. Нажмите кнопку Вкл/Выкл и выберите режим использования.
5. Плавными возвратно-поступательными движениями перемещайте щетку вдоль линии зубов.
6. Продолжайте выполнять эти движения в течение всего цикла чистки.





## УХОД И ХРАНЕНИЕ

### Рукоятка щетки

- После использования промойте металлический стержень рукоятки зубной щетки теплой водой. Не используйте твердые предметы для чистки стержня для предотвращения повреждения уплотнителя.
- Протрите рукоятку сухой тканью.

### Насадки

- Промывайте насадку в теплой проточной воде каждый раз после использования щетки.
- Промывайте теплой водой место соединения насадки и рукоятки зубной щетки с периодичностью 1 раз в неделю.
- Меняйте насадки каждые 3 месяца.

### Зарядная станция

- Отключите устройство от сети перед его чисткой.
- Протирайте зарядную станцию слегка влажной мягкой тканью.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1,7 Вт
Напряжение	100-240 В
Батарея	800 mAh/14500
Класс защиты	IPX7
Уровень защиты	IPX7
Тип изделия	ультразвуковая зубная щетка
Таймер	2 минуты
Время эксплуатации	180 минут
Время зарядки	16-24 часа
Комплектация	1 x ультразвуковая зубная щетка 2 x насадки для щетки 1 x зарядная станция 1 x руководство по эксплуатации