



магазин
ИННОВАЦИЙ



Аппарат для аквапилинга Gezatone MD-3A 400

руководство пользователя



GÉZATONE



AQUA PEELING MD-3a 400

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



GÉZATONE



AQUA PEELING MD-3a 400

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВАШЕГО АППАРАТА


ПРИБОР AQUA PEELING MD-3a 400 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГЛУБОКОГО И ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С ПОВЕРХНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ВЫРАВНИВАНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА, УСТРАНЕНИЯ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА ПОСРЕДСТВОМ АКВАПИЛИНГА: ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУИ ЖИДКОСТИ И ВАКУУМА.




ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
АКВА - ПИЛИНГ




ВАКУУМНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

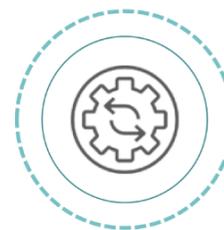

АКТИВИЗАЦИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ

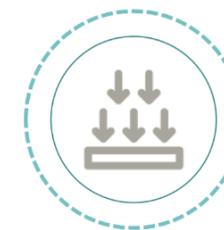

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ

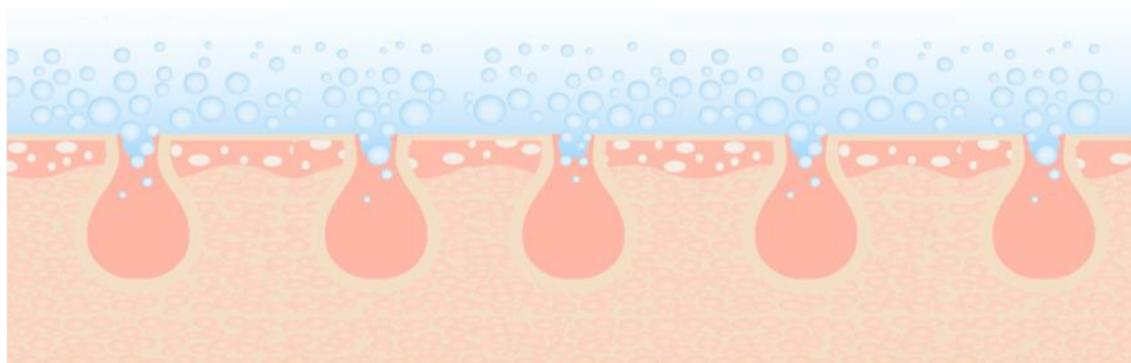


GÉZATONE



AQUA PEELING MD-3a 400

АКВА ПИЛИНГ / ГИДРОДЕРМАБРАЗИЯ

ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКИ НА КОЖУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОДАЕТСЯ СТРУЯ ЖИДКОСТИ, КОТОРАЯ В КОМБИНАЦИИ С ВАКУУМОМ, ЭФФЕКТИВНО **ОЧИЩАЕТ**, ВЫМЫВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР, **ОТШЕЛУШИВАЕТ** ОТМЕРШИЕ КЛЕТКИ И ОРОГОВЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ, ОДНОВРЕМЕННО **ВЫРАВНИВАЕТ** МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ.

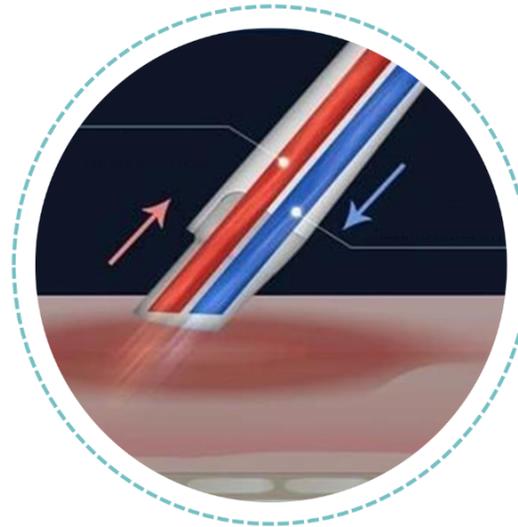

ОЧИЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ АКВАПИЛИНГА

ДЕЛИКАТНАЯ И НЕ ТРАВМИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ АППАРАТНОГО УХОДА ДАЖЕ ЗА СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ
КОЖИ



УМЕНЬШЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА
ЛИЦА



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ ПОР
ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



КОРРЕКЦИЯ
РУБЦОВ,
ШРАМОВ И СТРИЙ



СТИМУЛЯЦИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ И
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА

GÉZATONE



AQUA PEELING MD-3a 400

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА




ЗЕРКАЛО

ТРУБКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ДЛЯ
ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

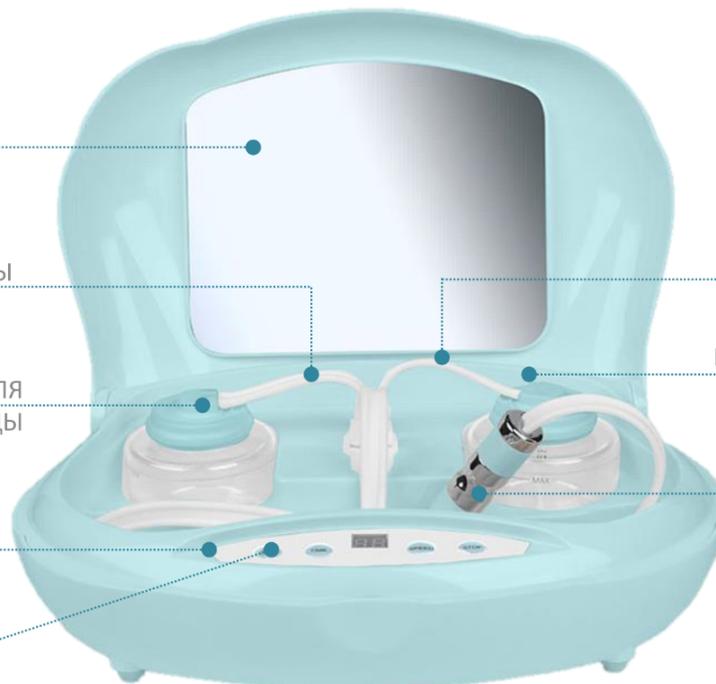

Насадка А
Для шеи

Насадка В
Для носа

Насадка С
Для лица

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ ЧИСТОЙ
ВОДЫ

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ДЛЯ
ЧИСТОЙ ВОДЫ

МАНИПУЛА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



GÉZATONE



AQUA PEELING MD-3a 400

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ



УДАЛИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КОСМЕТИКУ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ
СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВА С АНА КИСЛОТАМИ.



ПОДСОЕДИНИТЕ ШЛАНГИ КОНТЕЙНЕРОВ И МАНИПУЛЫ К
АППАРАТУ, УСТАНОВИТЕ НАСАДКУ НА МАНИПУЛУ.



ПОДКЛЮЧИТЕ АППАРАТ К СЕТИ.



ЗАПОЛНИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЧИСТОЙ ЖИДКОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ДО УРОВНЯ.
ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ.



ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА НАЖМИТЕ КНОПКУ ON / OFF



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗНАЧЕНИЕ ТАЙМЕРА – 15 МИНУТ.
КНОПКОЙ TIME МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ.



ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ КНОПКОЙ SPEED.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПО УМОЛЧАНИЮ – СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ ПРОЦЕДУРЫ С НИЗКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ.

ПОДСВЕТКА КОНТЕЙНЕРОВ:

РЕЖИМ L – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ – СИНИЙ

РЕЖИМ M – СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - КРАСНЫЙ

РЕЖИМ H – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ - ЗЕЛЕНый



НАЖАТИЕ НА КНОПКУ STOP ПОЗВОЛЯЕТ ОСТАНОВИТЬ
ПРОЦЕДУРУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ / ПАУЗА.
ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ АППАРАТА.



ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОДНОМ
МЕСТЕ БОЛЕЕ 3x СЕКУНД.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИЩАЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ ПОСЛЕ КАЖДОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА.