



магазин
ИННОВАЦИЙ




Массажер для ног Gezatone AMG725

Руководство пользователя



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

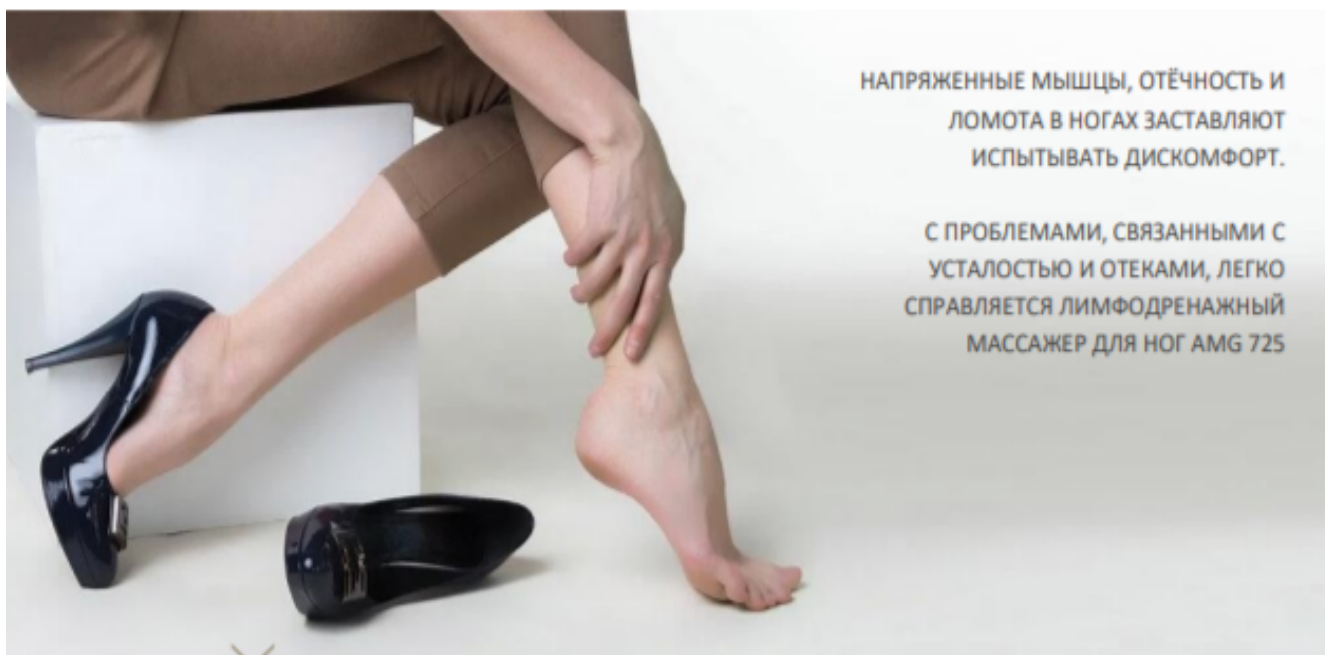

НАПРЯЖЕННЫЕ МЫШЦЫ, ОТЁЧНОСТЬ И ЛОМОТА В НОГАХ ЗАСТАВЛЯЮТ ИСПЫТЫВАТЬ ДИСКОМФОРТ.

С ПРОБЛЕМАМИ, СВЯЗАННЫМИ С УСТАЛОСТЬЮ И ОТЕКАМИ, ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ AMG 725



ЗАСТОЙ И ОТЕЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ И ЛИМФЫ В КОНЕЧНОСТЯХ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКЕ, ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ХОДЬБЕ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕПОДВИЖНОСТИ.
УСТАЛОСТЬ В МЫШЦАХ НОГ ПРИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ ИЛИ МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ.



ЗАТЕКШИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ И НЕГНУЩИЕСЯ НОГИ ПОСЛЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СИДЕНИЯ ИЛИ СТОЯНИЯ



МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ И ТЯЖЕСТЬ ПРИ ВЫСОКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ



ОТЕЧНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ДРЕНАЖА И ЦИРКУЛЯЦИИ, ЗАСТОЙ ЖИДКОСТИ

ФУНКЦИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРИБОР, КОМБИНИРУЮЩИЙ РОЛИКОВУЮ СТИМУЛЯЦИЮ, ВИБРОМАССАЖ И КОМПРЕССИОННЫЙ ПНЕВМОМАССАЖ С ГЛУБОКИМ ИК ПРОГРЕВОМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ УСТАЛЫХ И ОТЕКШИХ НОГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА, ВСТРОЕННАЯ В ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СИМПАТИЧНОГО ПУФИКА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО КАК МАССАЖЕР ДЛЯ ЯГОДИЦ, А ЕСЛИ ПОЛОЖИТЬ НОГИ СВЕРХУ – МАССАЖ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ. БЛАГОДАРЯ АМГ 725 МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕЧНОСТИ И ТЯЖЕСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО ВСЕГО 10 МИНУТ В ДЕНЬ.



РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ



ПНЕВМО- КОМПРЕССИОННЫЙ
МАССАЖ



ИК ПРОГРЕВ



ВИБРОМАССАЖ

ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МАССАЖЕР AMG 725 СТАНЕТ ПОМОЩНИКОМ ВСЕМ ЛЮДЯМ, И ЖЕНЩИНАМ И МУЖЧИНАМ, СТРАДАЮЩИМ ОТ УСТАЛОСТИ НОГ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.



ДЛЯ ВСЕХ КТО
ИСПЫТЫВАЕТ НАГРУЗКИ
НА НОГИ И МНОГО ХОДИТ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СИДЯЧИХ» И
«СТОЯЧИХ» ПРОФЕССИЙ ИЗБАВЯТСЯ ОТ
БОЛЕЗНЕННОСТИ



ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕГУЛЯРНО
НОСИТ ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ
КАБЛУКЕ



Артикул 1301256



ДЛЯ ТЕХ, КТО В СТРЕССЕ И
УСТАЛ



ДЛЯ ТЕХ КТО МАЛО ДВИГАЕТСЯ И
ОЩУЩАЕТ УПАДОК СИЛ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬШИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ



МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТКАНИ, ЧЕРЕДУЯ ПЕРИОДЫ ДАВЛЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ.

СТИМУЛИРУЕТ КРОВОТОК И УСИЛИВАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ И ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МАССАЖЕРА. ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ ОКАЗЫВАЮТ МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ СТОПЫ.

Артикул 1301256

ЭФФЕКТЫ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

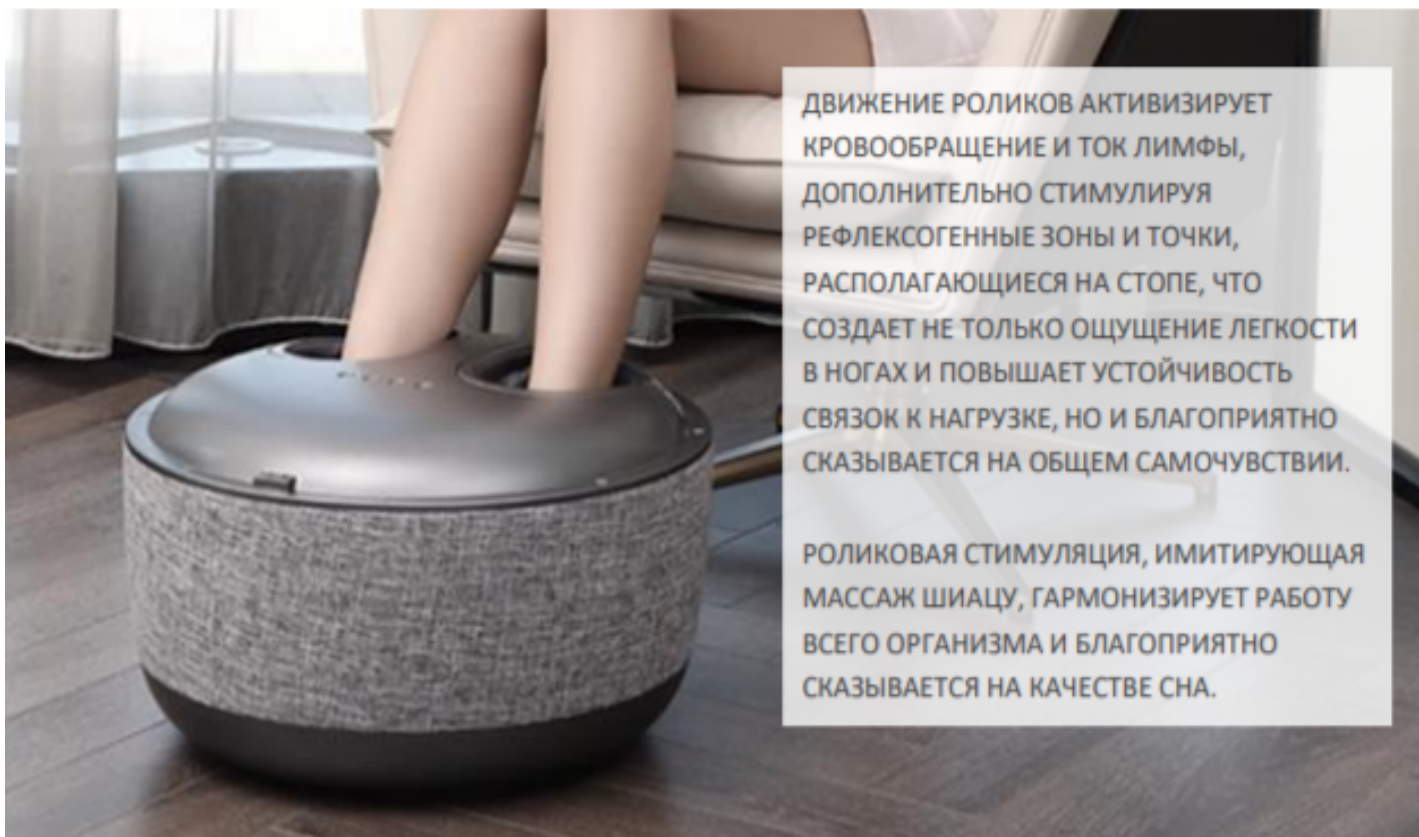

ДВИЖЕНИЕ РОЛИКОВ АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ТОК ЛИМФЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТИМУЛИРУЯ РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ И ТОЧКИ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ НА СТОПЕ, ЧТО СОЗДАЕТ НЕ ТОЛЬКО ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ В НОГАХ И ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ СВЯЗОК К НАГРУЗКЕ, НО И БЛАГОПРИЯТНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОБЩЕМ САМОЧУВСТВИИ.

РОЛИКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ, ИМИТИРУЮЩАЯ МАССАЖ ШИАЦУ, ГАРМОНИЗИРУЕТ РАБОТУ ВСЕГО ОРГАНИЗМА И БЛАГОПРИЯТНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ СНА.

Артикул 1301256

ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПРОРАБОТКА
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ТОЧЕК СТОПЫ

ВИБРОМАССАЖ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЯ НА ДВИЖЕНИЕ КРОВИ И ЛИМФЫ, ВИБРАЦИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МЫШЦ И СНИМАЕТ СПАЗМЫ, БОРЕТСЯ С ОТЕЧНОСТЬЮ И УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ. СЛАБОЕ ТЕПЛО, ОЩУЩАЮЩЕЕСЯ ВО ВРЕМЯ ВИБРОМАССАЖА, СНИМАЕТ БОЛЕЗНЕННОСТЬ И РЕЛАКСИРУЕТ.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МАССАЖЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ФУНКЦИЮ ВИБРОМАССАЖА С ЛЕГКИМ ПОДОГРЕВОМ, ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРУЮ, МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕСТИ В ПОЯСНИЦЕ И РАССЛАБИТЬСЯ, А ТАКЖЕ ПРОВЕСТИ МАССАЖ ИКР, ПРОСТО ПОЛОЖИВ НОГИ СВЕРХУ.

Артикул 1301256

ЭФФЕКТЫ



ОБЩЕЕ
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



УСТРАНЕНИЕ ЗАСТОЯ
И ОТЕЧНОСТИ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



ПОВЫШЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ



ИК ПРОГРЕВ

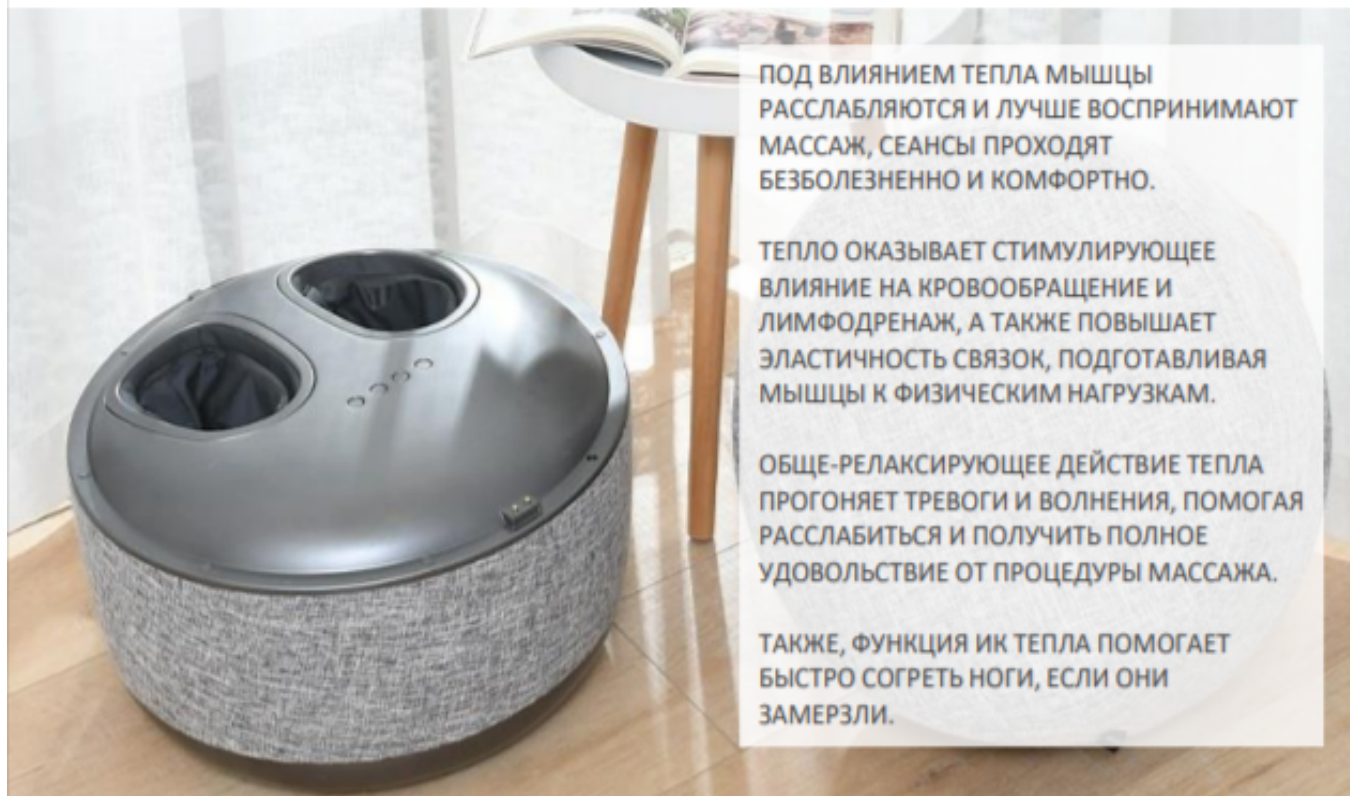

ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕПЛА МЫШЦЫ РАСЛАБЛЯЮТСЯ И ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАЮТ МАССАЖ, СЕАНСЫ ПРОХОДЯТ БЕЗБОЛЕЗНЕННО И КОМФОРТНО.

ТЕПЛО ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СВЯЗОК, ПОДГОТАВЛИВАЯ МЫШЦЫ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

ОБЩЕ-РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕПЛА ПРОГОНЯЕТ ТРЕВОГИ И ВОЛНЕНИЯ, ПОМОГАЯ РАСЛАБИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА.

ТАКЖЕ, ФУНКЦИЯ ИК ТЕПЛА ПОМОГАЕТ БЫСТРО СОГРЕТЬ НОГИ, ЕСЛИ ОНИ ЗАМЕРЗЛИ.

Артикул 1301256

ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ
И ЛОМОТЫ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
ОТЕКОВ И ЗАСТОЯ



ОБЩЕЕ
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



ПРОГРАММЫ

МАССАЖЕР AMG 725 МАССАЖЕР ИМЕЕТ ТРИ ПРОГРАММЫ, ТРИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И УДОБНУЮ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.


	<h3>1 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА</h3>  <p>СОЧЕТАЕТ ВИБРАЦИОННЫЙ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ С ПРЕССОТЕРАПИЕЙ. ФУНКЦИЯ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕПЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЁ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.</p>
<h3>2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА</h3>  <p>ИСПОЛЬЗУЕТ ТОЛЬКО ПНЕВМОКОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ФУНКЦИЯ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕПЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЁ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.</p>	<h3>3 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА</h3>  <p>СОЧЕТАЕТ ВИБРАЦИОННЫЙ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ. ФУНКЦИЯ ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕПЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ, ЕЁ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.</p>



ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МАССАЖЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ФУНКЦИЮ ВИБРОМАССАЖА С ЛЕГКИМ ПОДОГРЕВОМ, ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРУЮ, МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕСТИ В ПОЯСНИЦЕ И РАССЛАБИТЬСЯ, А ТАКЖЕ ПРОВЕСТИ МАССАЖ ИКР, ПРОСТО ПОЛОЖИВ НОГИ СВЕРХУ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

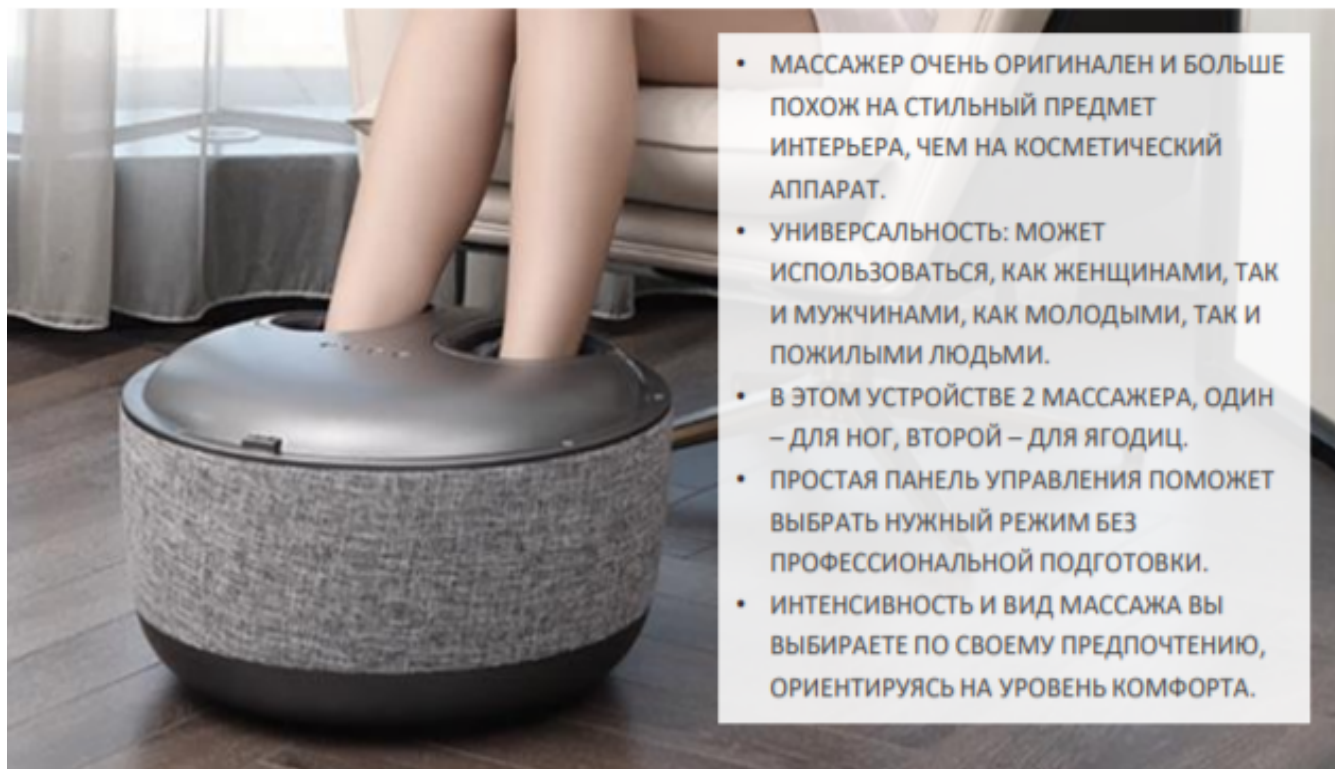

- МАССАЖЕР ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЕН И БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА СТИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА, ЧЕМ НА КОСМЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ.
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ, КАК МОЛОДЫМИ, ТАК И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
- В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ 2 МАССАЖЕРА, ОДИН – для ног, ВТОРОЙ – для ягодиц.
- ПРОСТАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
- ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВИД МАССАЖА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПО СВОЕМУ ПРЕДПОЧТЕНИЮ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА УРОВЕНЬ КОМФОРТА.

Артикул 1301256



К ЭТОМУ МАССАЖИСТУ НЕ НУЖНА ЗАПИСЬ. ОН ВСЕГДА ЖДЕТ ТОЛЬКО ВАС И БУДЕТ ГОТОВ ВОССТАНОВИТЬ КОМФОРТ НОГ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. УМНЫЙ ТАЙМЕР ОТКЛЮЧАЕТ ПРИБОР ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ, СЛЕДИТЬ ЗА ЧАСАМИ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА НЕ НУЖНО. ПРОСТО РАСЛАБЬТЕСЬ, AMG725 СДЕЛАЕТ ВСЕ САМ.

2

2 МАССАЖЕРА В
ОДНОМ КОРПУСЕ



4 ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ

3

3 МАССАЖНЫЕ
ПРОГРАММЫ



для женщин
и мужчин

3

3 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УСТАЛОСТИ И ТЯЖЕСТИ В НОГАХ, СОЧЕТАНИЕ МАССАЖА С ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИМ ТЕПЛОМ ДЕЛАЕТ МАССАЖЕР ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.



ГИГИЕНИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ЧЕХЛЫ МАССАЖЕРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ЛЕГКО СНИМАЮТСЯ, ИХ МОЖНО СТИРАТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СО СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ПОМОГАЕТ В ВЫБОРЕ ПРОГРАММЫ И СИЛЫ МАССАЖА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.



2 МАССАЖЕРА В ОДНОМ КОРПУСЕ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МАССАЖЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННУЮ ФУНКЦИЮ ВИБРОМАССАЖА С ЛЕГКИМ ПОДОГРЕВОМ, ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРУЮ, МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕСТИ В ПОЯСНИЦЕ, А ТАКЖЕ ПРОВЕСТИ МАССАЖ ИКР, ПОЛОЖИВ НОГИ СВЕРХУ.

ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ НОГИ

БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА ВАШИ НОГИ ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ. В ХОЛОДНЫЕ ЗИМНИЕ ДНИ МАССАЖЕР AMG725 СОЗДАСТ ДЛЯ НОГ КОМФОРТ И МЯГКО СОГРЕЕТ.





ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



ПЕРЕД СЕАНСОМ МАССАЖА НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ПОСТАВЬТЕ НОГИ В МАССАЖНЫЕ ОТСЕКИ, ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ И УСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПРИ ЖЕЛАНИИ ВКЛЮЧИТЕ ПРОГРЕВ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ, ПРИБОР ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ.



РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОСЛЕ 10 МИНУТНОГО МАССАЖА ЧУВСТВУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА СТОПЫ, НО И НА ВСЕ ТЕЛО. НОГИ ПЕРЕСТАЮТ ГУДЕТЬ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГКОСТЬ. ЗА СЧЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЧУВСТВУЕТСЯ ТЕПЛО, УХОДИТ ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ВЕДЬ НОГИ ЛЕГКИЕ И НЕ ГУДЯТ. НЕТ СКОВАННОСТИ И ТЯЖЕСТИ В РАЙОНЕ ПОЯСНИЦЫ.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ТЯЖЕСТИ И
ЛОМОТЫ В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ
В МЫШЦАХ



ЛЕГКОСТЬ
В НОГАХ



СОКРАЩЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННЫХ
ОЩУЩЕНИЙ В
МЫШЦАХ



УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
ПОЯСНИЦЕ



ОБЩИЙ РЕЛАКС,
УСТРАНЕНИЕ
СТРЕССА

** Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОСЛЕ ПРИЕМА СЕДАТИВНЫХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ И СНОТВОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЭПИЛЕПСИЯ, РЕВМАТИЗМ.
- ИМПЛАНТЫ, ШТИФТЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЧАСТИ НОГ И СТОПЫ.
- НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МАССАЖЕР ПРИ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ, ПОВРЕЖДЕНИЯХ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
- ПОДАГРА
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- НАЛИЧИЕ СВЕЖИХ МОЗОЛЕЙ И ССАДИН, ДЕРМАТИТОВ, ГРИБКА СТОПЫ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ОСТЕОМИЕЛИТ, КОСТНАЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
- СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ: ВАРИКОЗ, ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ, ТРОМБОЗЫ, АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- БЕРЕМЕННОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301256

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	АС 220-240 В., 50 Гц / DC 24В 2А
ШУМ	Менее 55 Дб
ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:	10 минут
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	455 x 455 x 455 мм
ВЕС:	12 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	120 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног со съемной крышкой Gezatone, модель AMG725 – 1 шт.

Сетевой блок питания со шнуром - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.