



# Умная таблетница Auvon Smart Pill Box

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: умная таблетница

### 2. Характеристики

- Требуемое ПО: Smart Pill Reminder
- Совместимость: iOS 10.0+, Android 10.0+
- Тип питания: батарея CR2032 (1 шт.)
- Автономность: до 90 дней от одной батареи
- Версия Bluetooth: 5.0
- Размеры: 89 x 51 x 23 мм
- Вес: 53 г
- Размеры упаковки: 120 x 85 x 30 мм
- Вес в упаковке: 90 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Схема устройства



### 4. Кнопка



Механическая кнопка на корпусе таблетницы предназначена для выполнения следующих действий:

- 1) активации устройства;
- 2) проверки заряда;
- 3) выключения напоминаний о приеме лекарств.

Чтобы привязать таблетницу к смартфону с помощью Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку. Повторите процедуру для отвязки устройства.

## 5. Светодиодный индикатор

Таблетница снабжена светодиодным индикатором, который меняет цвет в зависимости от ситуации.

**Синий цвет** активируется в следующих случаях:

- 1) устройство включено (синий индикатор мигнет 1 раз);
- 2) таблетница открыта (синий индикатор мигнет 1 раз);
- 3) привязка по Bluetooth выполнена успешно (синий индикатор мигнет 1 раз);
- 4) активирован режим сопряжения (синий индикатор мигает на протяжении 60 секунд).

**Зеленый цвет** активируется в следующих случаях:

- 1) напоминание о приеме лекарств (зеленый индикатор мигает на протяжении 20 секунд);
- 2) батарея заряжена более чем на 20% (зеленый индикатор мигнет 3 раза);
- 3) активирован режим поиска таблетницы (зеленый индикатор мигнет 3 раза).

**Красный цвет** активируется в случае, если батарея заряжена менее чем на 20% (красный индикатор мигает по 3 раза на протяжении 2 часов).


## 6. Динамик

Встроенный в таблетницу динамик активируется в следующих случаях:


- 1) напоминание о приеме лекарств (также прозвучит звуковой сигнал);
- 2) активирован режим поиска таблетницы (также звучит звуковой сигнал).

## 7. Замена батареи


Аккуратно потяните крышку батарейного отсека так, как показано на схеме ниже.

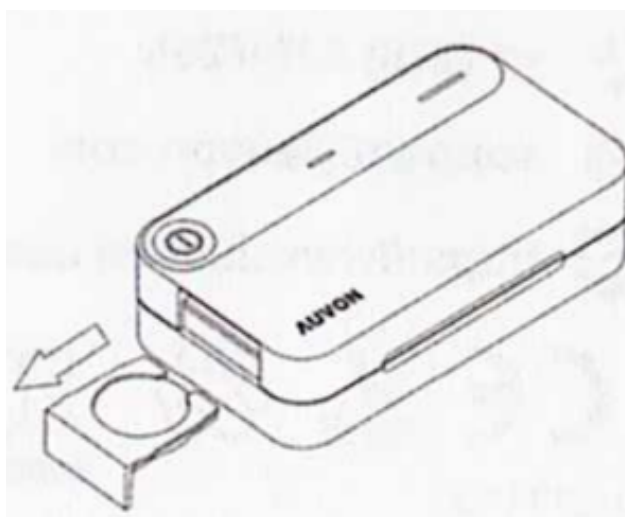

Извлеките использованную батарею и вставьте новую, соблюдая полярность.

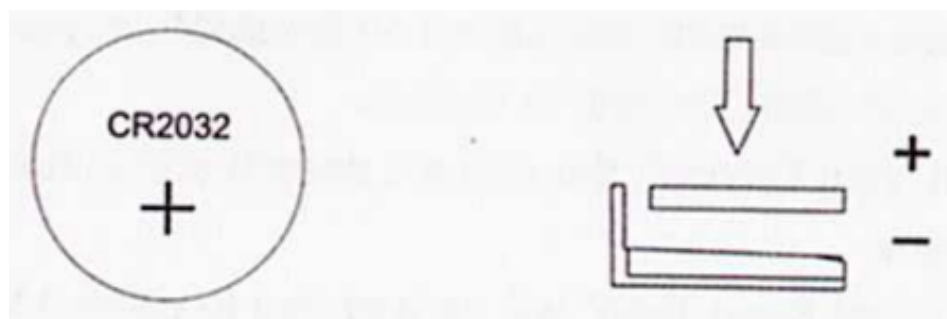

Вставляя крышку батарейного отсека обратно в таблетницу, удерживайте батарею пальцем. Схема снизу наглядно показывает, как должна располагаться батарея относительно устройства.

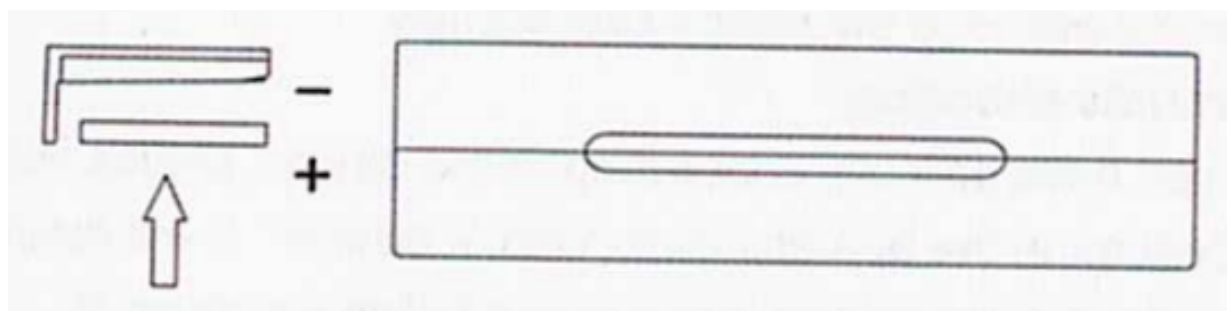

## 8. Установка мобильного приложения



Отсканируйте QR-код для скачивания мобильного приложения и дождитесь его установки (только для iOS и Android).



Войдите в приложение, активируйте Bluetooth на мобильном устройстве. После этого включите таблетницу (прозвучит короткий звуковой сигнал) и активируйте режим сопряжения, зажав кнопку на 3 секунды. Во время мигания синего индикатора в списке Bluetooth-устройств в настройках вашего смартфона появится таблетница. Подключитесь к ней, чтобы завершить сопряжение.

**Примечание:** чтобы выйти из режима сопряжения, нажмите кнопку 1 раз.

## 9. Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с устройством, зайдите в раздел «Настройки» в мобильном приложении и выберите «Отключить устройство». Сопряжение между смартфоном и таблетницей будет разорвано, и вы сможете привязать устройство повторно.

## 10. Комплектация

- Смарт-таблетница Auvon Smart Pill Box
- Документация