



Diamond Eraser

ИНСТРУКЦИЯ

ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Diamond Eraser предлагается как дополнение к стандартным процедурам ухода за полостью рта. Основная цель – повышение эффективности очистки зубов от загрязнений и отбеливание. Позволяет удалять отложения на зубах с одновременной полировкой их поверхности.

Предназначен для применения в любых условиях.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блистеры содержат по одному устройству белого или черного цвета с указанием использованного вкусового и ароматизирующего препарата.



1. Маркировка изделия со вкусом и запахом мяты
2. Маркировка изделия со вкусом и запахом клубники

На блистерах присутствует изображение фирменного логотипа продукта, а также надпись «**Diamond Eraser**».

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие состоит из пластикового корпуса цилиндрической формы со съемным колпачком, защищающим поверхность рабочего наконечника. Внутри корпуса размещен стержень, изготовленный из смеси силикона и алмазной крошки с частицами размером до 2 микрон.



1. Цилиндрический корпус
2. Защитный колпачок
3. Наконечник силиконового стержня
4. Силиконовый стержень

В состав силиконового наконечника включены вкусовые ингредиенты и ароматизаторы из натуральных природных компонентов со вкусом мяты или клубники.


Устройства в корпусе черного цвета имеют вкус и запах мяты, в корпусе белого цвета – клубники.

Общая длина устройства составляет 11 см.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед непосредственным применением устройства необходимо убедиться в отсутствии каких-либо загрязнений на наконечнике силиконового стержня или каких-либо иных нарушений установленных требований.

Очистка эмали зубов от загрязнений производится при скольжении наконечника силиконового стержня по зубной эмали. По окончании процедуры необходимо прополоскать полость рта водой комфортной температуры и произвести очистку наконечника силиконового стержня водой. Как завершающий этап процедуры осуществляется полировка поверхности зубов. По окончании процесса полировки следует еще раз произвести ополаскивание полости рта и очистку силиконового наконечника.

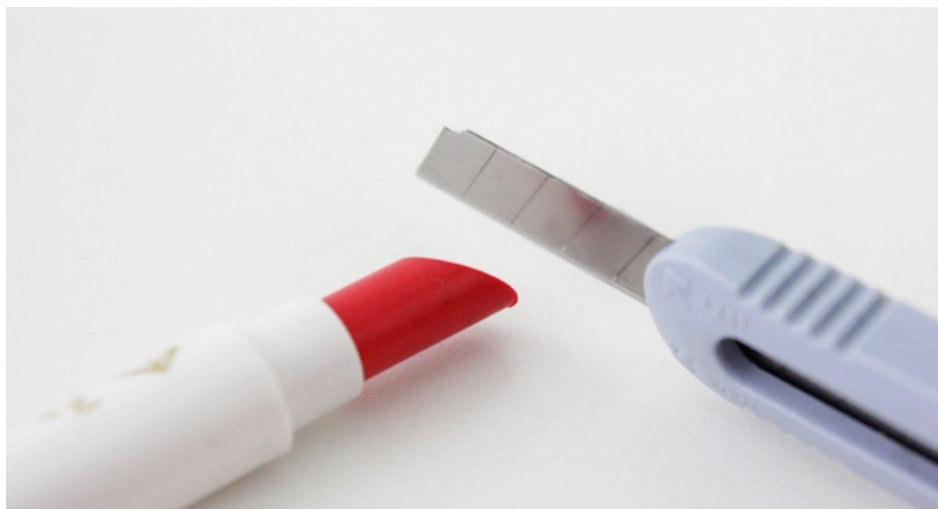

В случае физического износа или необратимого загрязнения наконечника силиконового стержня допускается его многократная подрезка. Для более эффективного использования в местах затрудненного доступа к загрязнениям, в том числе между зубами, рекомендуется придавать наконечнику форму, наиболее подходящую для выполнения описываемой процедуры. Новый участок силиконового стержня сохраняет все свойства начального. Механические свойства силиконового наконечника позволяют избежать неприятных ощущений при выполнении процедур.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять устройство при наличии больных зубов, заболеваний полости рта или во время прохождения любых стоматологических процедур.

При возникновении или наличии аллергической реакции на компоненты силиконового стержня процедуры по обработке полости рта необходимо немедленно прекратить.

При сохранении аллергических проявлений необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Не рекомендуется применять для обработки полости рта у детей.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство не требует особых условий по уходу. Необходимо выполнять очистку наконечника силиконового стержня чистой теплой водой. Разрешается применять моющие средства гигиенического типа. Корпус устройства подвергается аналогичной обработке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в местах, недоступных для детей.

Устройство рекомендуется хранить при комнатной температуре в вертикальном положении.