



магазин
ИННОВАЦИЙ

Беспроводной ирригатор H2OFloss

Руководство пользователя





1. Тип товара: ирригатор

2. Характеристики

- Диапазон давления струи: от 130 до 750 кПа
- Частота пульсации: 1200 имп./мин.
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Количество режимов работы: 5
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Объем резервуара: 300 мл
- Количество насадок: 8 шт.
- Длина зарядного кабеля: 1,2 м
- Размеры: 225 x 85 x 70 мм
- Вес: ~330 г
- Размеры упаковки: ~250 x 112 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~650 г

3. Меры предосторожности

Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться со стоматологом.

Противопоказания:

- гингивит;
- пародонтит;
- стоматит;
- пульпит;
- травматические поражения десен;
- наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних стадий;
- истончение эмали.

Используйте ирригатор исключительно для очистки ротовой полости (или носовой полости при использовании назального наконечника). Струя воды, направленная в глаза, уши или горло, может нанести серьезную травму. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжелых формах пародонтита перед применением прибора обратитесь к стоматологу.



Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.

Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора. Не заливайте в резервуар никаких жидкостей, кроме питьевой воды.

После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости для воды и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем способны развиться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором.

Дети должны использовать устройство под присмотром взрослых. Минимальный возраст для использования устройства составляет 7 лет.

iG-Store не несет ответственности за возможные последствия использования прибора, вызванные неправильной эксплуатацией и несоблюдением правил техники безопасности.

4. Руководство по эксплуатации

Для зарядки ирригатора присоедините его к разъему USB с силой тока не менее 1 А, используя шнур, входящий в комплект поставки. Разъем для подключения шнура расположен на передней стороне корпуса ирригатора под черной резиновой крышкой.


Время полной зарядки может составлять до 6 часов (в зависимости от мощности адаптера питания). Наблюдать за ходом зарядки вы можете с помощью светодиодного индикатора на корпусе устройства.

Перед началом использования вставьте в ирригатор нужную насадку — для этого нажмите кнопку, расположенную в верхней части устройства (возле

отверстия для насадки), вставьте насадку, а затем отпустите кнопку. После этого откройте крышку, расположенную в нижней части ирригатора (на стенке резервуара) и, наклонив устройство, наполните его чистой питьевой водой, после чего плотно закройте крышку.

Включите устройство нажатием круглой кнопки и выберите нужный режим последовательными нажатиями овальной кнопки **Mode**. После использования выключите устройство нажатием круглой кнопки.

5. Схема ирригатора и перечень насадок

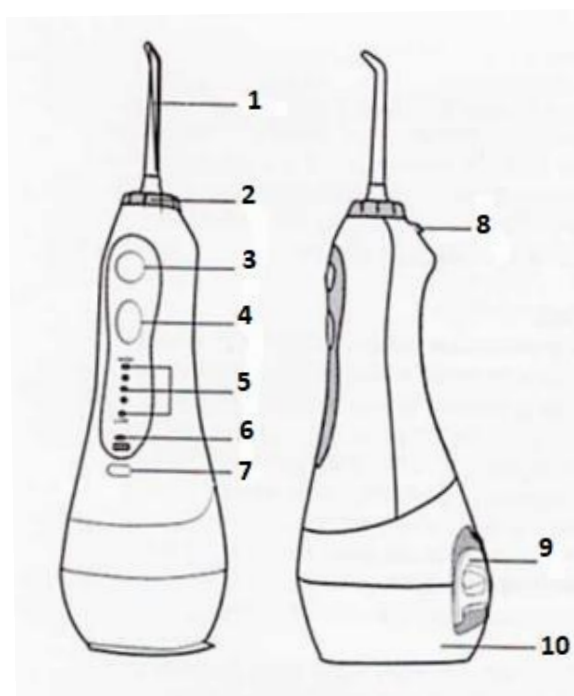

1. Насадка
2. Регулятор вращения
3. Кнопка питания
4. Кнопка выбора режима
5. LED-индикаторы режимов
6. LED-индикатор зарядки
7. Гнездо зарядки
8. Кнопка для смены насадки
9. Крышка бака для воды
10. Резервуар для воды



6. Общие рекомендации по использованию ирригатора

Почистите зубы перед использованием ирригатора.

Наклонитесь над раковиной — при использовании ирригатора вода должна свободно вытекать из ротовой полости.

Начните с минимального давления и постепенно увеличивайте его.

Используйте менее мощный режим для гидромассажа дёсен и более мощный для удаления зубного налёта.

Продвигайтесь от передних зубов к коренным. Сначала очищайте переднюю и заднюю плоскости зуба, затем межзубный промежуток и область контакта зуба



и десны.

Удерживайте ирригатор так, чтобы водяная струя встречалась с очищаемой поверхностью под прямым углом.

После использования устройства тщательно прополощите рот, чтобы удалить загрязнения.

После использования ирригатора выключите устройство, снимите резервуар с водой и слейте остатки в раковину. Установите резервуар на место и оставьте крышку открытой до полного высыхания.

Перед началом использования мы рекомендуем ознакомиться с любой из популярных видеопрограмм на YouTube. Их можно найти по запросу «Как пользоваться ирригатором».

7. Комплектация

- Ирригатор
- Насадки (8 шт.)
- Пенал
- Зарядный кабель
- Документация

8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР