


Массажер для шеи Rozia OR-8017

Руководство пользователя



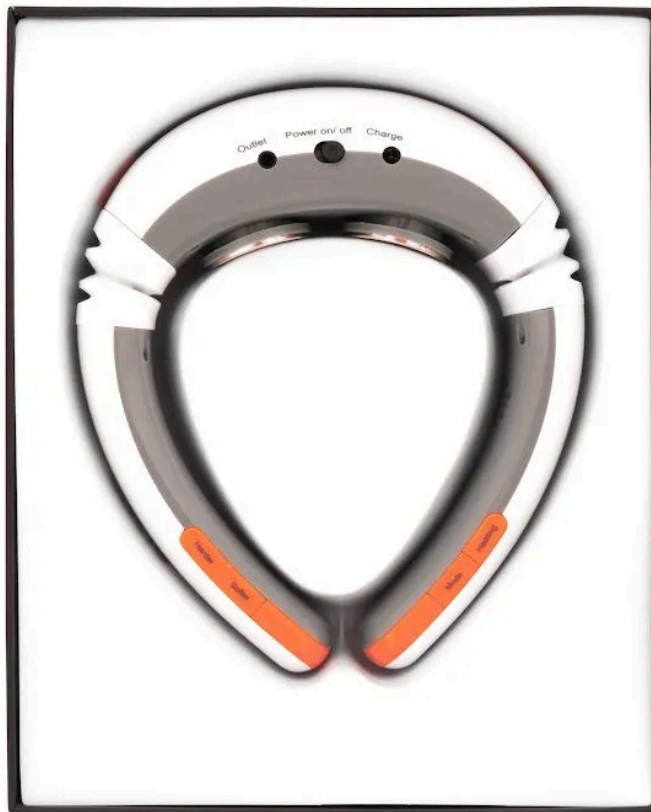

1. Тип товара: портативный шейный массажер

2. Характеристики

- Цвет: белый
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Время работы от аккумулятора: до 6 часов
- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
- Время зарядки аккумулятора: до 3 часов
- Размеры: 160 x 140 x 60 мм
- Вес: ~190 г
- Размеры упаковки: 225 x 185 x 70 мм
- Вес в упаковке: 450 г

3. Руководство по эксплуатации

Откройте упаковку и извлеките из нее все элементы комплекта поставки. Перед использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для подзарядки используется разъем с обозначением **Charge** на корпусе устройства.

С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите массажер к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки аккумулятора занимает до 3 часов.

Во время зарядки на LED-дисплее устройства (рядом с черным переключателем) отображается индикатор, с помощью которого можно узнать, насколько заряжен аккумулятор.

Перед первым использованием массажера необходимо проконсультироваться с врачом. Устройство использует метод электрической миостимуляции, который противопоказан:

- беременным женщинам;
- лицам, страдающим эпилепсией;
- лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- лицам, использующим электронные импланты и кардиостимуляторы.



В некоторых случаях при длительном использовании массажера возможно раздражение кожного покрова. Массажер не предназначен для использования детьми. Также не рекомендуется использовать массажер, если кожа влажная.

После полной зарядки аккумулятора включите массажер с помощью черного переключателя, расположенного рядом с надписью **Power On/Off**. Затем расположите массажер на шее так, чтобы металлические контактные площадки плотно соприкасались с кожей. Если же контакты прилегают к шее неплотно, вы можете не ощутить эффекта от массажа.

Используйте пульт или оранжевые кнопки на корпусе устройства, чтобы точно настроить работу массажера. Для переключения между 6 программами микротоковой стимуляции нажимайте кнопку **Mode**.

Обратите внимание: выбранный режим работы прибора отображается на LED-дисплее, размещенном под переключателем включения. Цифра 1 отражает первую программу. Цифра 2 – вторую. Цифра 3 – третью.

Одновременно активные цифры 1 и 3 обозначают четвертую программу.

Одновременно активные цифры 2 и 3 обозначают пятую программу.

Одновременно активные цифры 1, 2 и 3 обозначают шестую программу.

Для любого из 6 видов массажа можно выбрать один из 15 уровней интенсивности – для этого предусмотрены кнопки **Harder** и **Softer**. Во время работы массажера нажимайте кнопку **Harder**, чтобы повысить уровень воздействия, и кнопку **Softer**, чтобы понизить. При нажатии кнопок массажер издает звуковой сигнал, уведомляющий о переключении программы массажа или уровня интенсивности стимуляции.

Обратите внимание: во всех случаях рекомендуется начинать с минимальной интенсивности и плавно повышать уровень воздействия. При возникновении дискомфортных ощущений рекомендуется снизить интенсивность на одну-две ступени. При переключении на другую программу нажатием кнопки **Mode** интенсивность массажа автоматически снижается до минимума, чтобы вы не испытали дискомфорта.

Вы можете активировать подогрев, нажав кнопку **Heating** во время массажа. Повторное нажатие этой кнопки увеличит температуру подогрева. Чтобы выключить подогрев, еще раз нажмите кнопку **Heating**.

Если вы снимете массажер, подача тока на электроды прекратится. Когда вы



вновь наденете массажер, стимуляция возобновится, но будет автоматически установлен минимальный уровень воздействия. Вы можете вновь повысить его до комфортного значения с помощью кнопки **Harder**.

Миостимулятор можно использовать для массажа не только шеи, но и других участков тела – например, плеч, рук или спины. Для этого в комплекте предусмотрен длинный белый кабель с двумя электродами. Вставьте этот кабель в разъем с надписью **Outlet**. Затем оба электрода соедините с силиконовыми патчами из комплекта. Далее снимите с патчей защитную пленку и наклейте их на нужный участок тела. Теперь вы можете включать прибор.

Важно: массажер можно использовать для миостимуляции шеи, даже если к нему подключены съемные электроды. Таким образом, вы можете одновременно использовать устройство для массажа шеи и других участков тела.

Примечание: силиконовые патчи рассчитаны примерно на 80 применений. После применения на них рекомендуется вновь наклеить защитную пленку. Патчи липкие, поэтому они подвержены негативному воздействию пыли, воды, шерсти домашних животных, а также ряда других факторов. Рекомендуется хранить патчи в сухом, чистом и проветриваемом месте. Если патчи перестали прилипать к коже, вы можете фиксировать их с помощью пластыря.

Для ухода за массажером используйте сухие и влажные салфетки. Допускается использование салфеток, пропитанных дезинфицирующим спиртовым раствором.

4. Меры предосторожности и рекомендации по применению

Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не используйте массажер, если кожа влажная или на нее недавно были нанесены крем, лосьон, масло или другие жидкие уходовые средства.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте неисправные сетевые адаптеры или кабели для зарядки



устройства.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус массажера.

Устройство автоматически выключается спустя 20 минут непрерывной работы. Если это произошло, подождите 10-20 минут, прежде чем использовать массажер повторно. При этом его потребуется включить повторно, переведя переключатель сначала в положение **Off**, а потом снова в положение **On**.

Заряда встроенного аккумулятора хватает до 6 часов работы устройства в режиме микротоковой стимуляции. Это время может быть существенно уменьшено при активации подогрева или использовании микротоковой стимуляции на высоких уровнях интенсивности.

Электроды с силиконовыми патчами не следует прикреплять к области сердца, зоне вокруг глаз, горлу, паховой зоне, подмышкам, местам расположения лимфатических узлов.

Храните устройство и комплектующие в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов.

После использования массажера убедитесь, что он выключен (переведите черный переключатель в положение **Off**).

5. Комплектация

- Массажер для шеи
- Зарядный кабель
- Кабель с электродами
- Силиконовые патчи
- Пульт ДУ
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР