



СВЧ-грелка

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сухая грелка применяется очень давно, можно сказать, что она – "прародительница" всех существующих сейчас видов грелок. Самый простой ее вариант – подушечка, наполненная сухой солью, зернами пшеницы или вишневыми косточками. Сухая грелка остывает значительно медленней водяной.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СВЧ-грелка – уникальное современное устройство, пришедшее на смену известным нам резиновым.

- Отдает тепло на протяжении 8 часов
- Температура нагрева – 42 °С
- Нагревается всего за 4 минуты

РЕКОМЕНДАЦИИ

Грелка поможет при:

- Коликах у младенцев
- Мышечной боли
- Головной и зубной боли
- Периодических болях


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Грелка является многоразовой и представляет собой герметичную емкость из плотного материала, наполненную раствором **полиэтиленгликоля**, полимера, известного как пищевая добавка **E1521**. Полиэтиленгликоль – это вещество синтетического происхождения, которое получают методом воздействия на окись этилена щелочными катализаторами и гликолями. Основные свойства – повышение растворимости субстанций и их концентрации. В нормальном состоянии раствор плотный, гелеобразный. При помещении мешочка в СВЧ с веществом происходят физико-химические процессы, в результате которых оно становится жидким. В молекулах полимера накапливается тепло, полученное из СВЧ, чтобы передавать его на протяжении всего времени использования.



ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поместите подушечку в СВЧ.

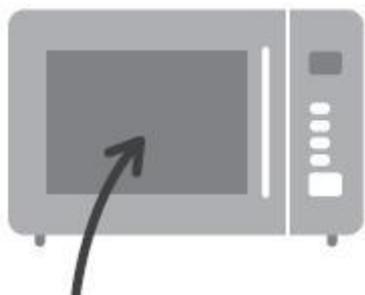

2. Установите время и мощность печи согласно таблице 1.



3. Аккуратно достаньте белую подушечку за край упаковки.



4. Аккуратно поместите белую подушечку в красный чехол грелки.



Таблица 1

Мощность СВЧ	600 Вт	700 (800) Вт	900 (1000) Вт
Время нагрева	4 мин.	3 мин. 30 сек.	3 мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не рекомендуется оставлять на продолжительное время с детьми или людьми с ограниченными возможностями.
2. Не вскрывайте белую подушечку грелки.
3. Будьте осторожны при работе с горячей подушечкой. Возможно получение ожогов.
4. Не допускайте перегрева жидкости в белом мешочке.
5. При вскрытии подушечки дождитесь полного затвердения вещества, находящегося внутри.
6. В случае попадания горячего вещества на кожу немедленно промойте теплой водой.
7. Запрещено хранить в холодильнике.