

breo®

МОДЕЛЬ INeck Special*

*ай-нэк спешл

Шейный массажер

Инструкция Пользователя

 **Sleep Professor™**
revolutionary sleep technologies



**Спасибо, что приобрели массажер
Sleep Professor™ iNeck Special***

Просим Вас внимательно изучить информацию, приведенную в данной инструкции, перед применением массажера. Если массажер будут использовать несколько человек, то все должны быть ознакомлены с инструкцией по эксплуатации.

Мы желаем Вам приятного отдыха!





Назначение и рекомендации по использованию

Представляем новейшую разработку - шейный массажер Sleep Professor iNeck Special предназначен для воздействия на мышцы шеи.

Дизайн, функции, форма прибора были разработаны при помощи новейших компьютерных технологий, форма оптимальна и повторяет контуры шеи. Разработка массажера велась при участии компании с мировым именем BREO, специализирующейся на товарах для отдыха и релаксации. Аналогов модели Sleep Professor нет на рынке, специальные режимы оптимально подобраны специалистами Sleep Professor (доктор Роберт Оксман) и специалистами BREO.

Микропроцессорное управление, выполняющие интеллектуальные сеансы массажа, помогает выбрать необходимый режим воздействия.

Оказывая эффект тренировки, массажер восстанавливает работоспособность мышц шеи, нормализует тонус при утомлении, снимает нервное напряжение и стресс благодаря ритмичному массажному воздействию.

В результате клетки и ткани насыщаются кислородом, улучшается циркуляция крови, проходит скованность в области шеи.

Особенно хорошо помогает расслабиться и снять напряжение после активного трудового дня, позволяя легко заснуть и проснуться полными сил и энергии!

Шейный массажер Sleep Professor iNeck-Special это инновационный продукт под торговой маркой Sleep Professor. В основе массажного воздействия лежит использование технологии Shiatsu (Шиатцу - яп. «сиатцу», от «си» — палец и «атцу» — надавливание — постоянно развивающаяся традиционная японская практическая терапия, включает в себя множество различных техник). iNeck-Special помогает снизить напряжение мышц, понижая стресс и полностью расслабляя шею.

Массажер предназначен для всей семьи, он компактен, прост и удобен в обращении, удобно располагается на шее, выполнен из высокотехнологичных материалов.

Массаж Шиатцу – имитация человеческих рук:

- 4 режима массажа,
- Разминающий массаж,
- Снимает мышечное напряжение и усталость с шеи и плеч,
- Улучшает кровообращение,
- Регулируемый размер - регулировка с помощью гибкой середины массажера,
- Встроенный литиевый аккумулятор,
- Эргономичный и удобный в обращении.

Рекомендован людям с:

1. Малоподвижным образом жизни.
2. Не приятными ощущениями в плечах и шее, онемением и утомляемостью рук.
3. Людям, вынужденным проводить много времени за мониторами компьютеров: операторам, бухгалтерам, дизайнерам, инженерам.
4. С повышенным нервным напряжением, бессонницей.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством для правильного и безопасного использования массажера.

Противопоказания:

1. Нарушение целостности кожи, раны, острые периоды травмы или операции в месте воздействия, острые воспалительные и инфекционные процессы.
2. Состояние алкогольного опьянения, плохое самочувствие.
3. Черепно-мозговая травма, онкологические заболевания, обострение тяжелых хронических заболеваний.
4. Тяжелые заболевания сердечнососудистой системы,



- гипотонические состояния, неврологические заболевания.
5. Не предназначен для использования детьми.


ВНИМАНИЕ!

1. Данный массажер разработан для домашнего использования и не подходит для диагностики, профилактики, лечения, а так же для коммерческого использования. Не является изделием медицинского назначения.
2. Не используйте массажер во время управления транспортным средством, во время прогулки, во время сна.
3. Не используйте устройство при крайне высоких показателях температуры и влажности.
4. Используйте зарядное устройство, которое идет в комплекте, и соблюдайте меры безопасности.
5. Для очистки устройства используйте чистую, незначительно увлажненную хлопковую или фланелевую ткань. Устройство нельзя мыть водой.
6. Шум во время массажа допускается.
7. Продолжительность массажа регулируется по Вашему желанию и степени утомления шеи, рекомендованная продолжительность сеанса массажа не более 15 минут.
8. Перед началом сеанса массажа рекомендуется занять удобное положение.
9. Массажер интеллектуально управляем, в случае повышенной нагрузки, запускается защитный механизм и устройство прекращает работу.


Комплектация

В комплект входят:

1. Устройство – массажер Sleep Professor INeck Special*
2. Зарядное устройство
3. Инструкция пользователя

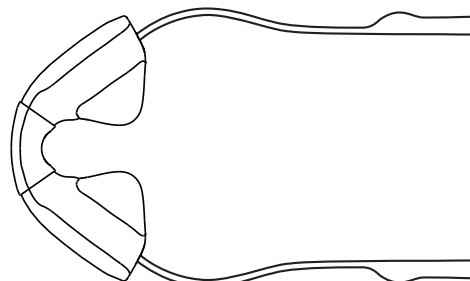

массажер Sleep Professor INeck Special*

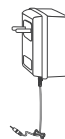


Зарядное устройство



Инструкция пользователя

Описание, внешний вид

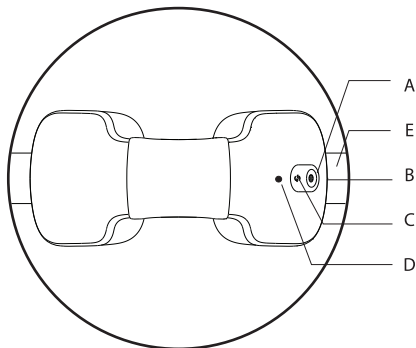

A - кнопка управления, с помощью которой массажер включается/выключается

B - разъем подключения зарядного устройства

C - кнопка управления, с помощью нее можно выбрать направление вращения массажных роликов

D – LED-индикатор, красный индикатор при включении

E – ремни для удерживания массажера и регулирования степени воздействия

Подготовка и использование

Подготовка устройства.

1. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить массажер. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем на массажере, подключите вилку к источнику тока.
2. Во время зарядки LED-индикатор загорится красным, а при достижении полного заряда индикатор станет зеленым.
3. В процессе зарядки устройством пользоваться нельзя.

Как одеть?

Расположите устройство на шее, потяните двумя руками за ремешки до желаемого положения.

Включение.

При однократном нажатии кнопки питания (кнопка A на схеме) устройство включится, а LED индикатор загорится красным. По умолчанию установлено время 15 минут, а режим массажа №1.

Режимы массажа:

Выбор режима: четыре типа массажа: если кратко нажимать кнопку выбора режима, согласно номеру режима массажа (кнопка C на схеме), то режимы будут изменяться следующим образом:

Режим 1 - массаж, слева направо

Режим 2 - массаж, справа налево

Режим 3 - массаж в направлении от центра к периферии

Режим 4 - массаж в направлении от периферии к центру

Выключение.

При нажатии кнопки выключения устройство останавливается, LED индикатор выключается.

Если установленное время массажа истекло, устройство автоматически выключается.

Устранение неполадок, хранение и транспортировка

При возникновении проблем при использовании устройства, используйте инструкции, приведенные ниже. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Проблема	Возможные причины	Решения
Нет включается	Низкий заряд батарей	Если да, зарядите
Интенсивность массажа слишком низкая		

Если период хранения превышает три месяца, пожалуйста, проверьте устройство и подзарядите в течение получаса. Хранить без постоянного воздействия прямых солнечных лучей, в условиях нормальной температуры и влажности.

Транспортировка.

Устройство обладает простой формой и допускается к перевозке в упаковке без каких-либо ограничений. Избегайте воздействия осадков на устройство без упаковки.

Ресурс работы массажера не ограничен и зависит от частоты и интенсивности использования.

Гарантия: 1 год с момента покупки, распространяется на отсутствие производственных дефектов. Утилизация по схеме обычных товарно-бытовых отходов, встроенный аккумулятор подлежит утилизации на предприятии, специализирующемся в этой области.

Соответствует ТР ТС 004/2011 ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ".

Технические характеристики, контакты

Потребляемая мощность: <6 Вт

Условия эксплуатации:

Атмосферное давление: 645-795 мм рт.ст.

Температура: 5°C – 40°C

Размеры:

Массажер: Д220мм*Ш105мм*В120мм

Масса нетто: ~ 855 г.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Импортер:

ООО «Торговый Дом «Аскона», 601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров ул. Комсомольская, 116г, стр. 25.

Производитель:

Shenzhen BREO Technology Co., LTD. 22/F Jinshan Building, 5033 Shennan East Road, Shenzhen City, China (Китай). Т. 86 755 820 733 36, F. 86 755 820 734 34.

По всем вопросам обращаться по телефонам горячей линии (звонки по России бесплатные):

8-800-555-222-5, 8-800-200-40-90

www.sleepprofessor.ru

www.askona.ru



МОДЕЛЬ INeck Special
Шейный массажер

breo®